


OMXB-B

Ручные вращательные платформы




OMXB60BL

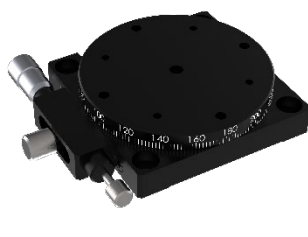


OMXB60BR




OMXB90BL

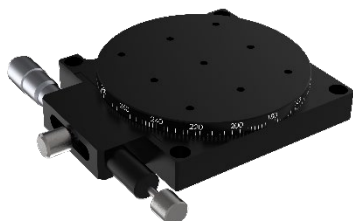

OMXB90BR

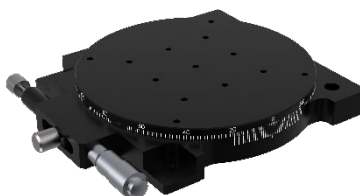

OMXB125BL

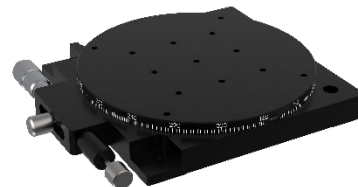

OMXB125BR

Преимущества серии

- Высокая чувствительность.
- Ультратонкий компактный дизайн.
- Совместимость с другими сериями.
- Диаметр платформы: 60/90/125 мм.
- Диапазон регулировки 360°.
- Диапазон тонкой настройки $\pm 5^\circ$.
- Нагрузка 3 кг.

Описание серии

Серия ручных вращательных платформ OMXB-B обладает высокой чувствительностью, которая обеспечивается роликовой муфты в конструкции и микрометрическим винтом. Ключевые параметры, такие как точность вращения, торцевое и радиальное биение, достигают наилучших значений среди ручных вращательных платформ данного класса на международном рынке. Подходят для решения задач в областях, где предъявляются высокие требования к регулировке угла вращения.





Отличающиеся параметры моделей

Модель	Диаметр платформы, мм	Положение винта	Высота платформы, мм	Масса, кг	Дифференциальная шкала, '	Концентричность
OMXB60BL	60	Слева	15	0,16	0,96	0,03
OMXB60BR	60	Справа	15	0,16	0,96	0,03
OMXB90BL	90	Слева	20	0,5	0,6	0,04
OMXB90BR	90	Справа	20	0,5	0,6	0,04
OMXB125BL	125	Слева	20	0,9	0,46	0,04
OMXB125BR	125	Справа	20	0,9	0,46	0,04

Основные параметры



Материал	Доралюминий	Обработка поверхности	Черное анодировани
Привод	Микрометрический винт	Цена деления шкалы, '	5
Диапазон грубой настройки, °	360	Диапазон тонкой настройки (°)	±5
Параллелизм	0,03	Нагрузка, кг	3

Чертеж OMXB60BL

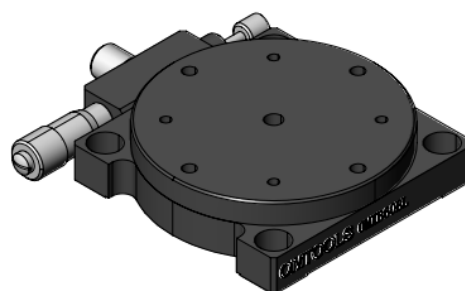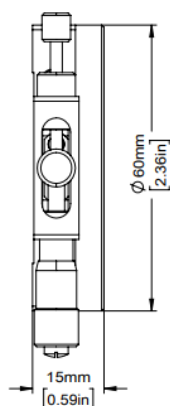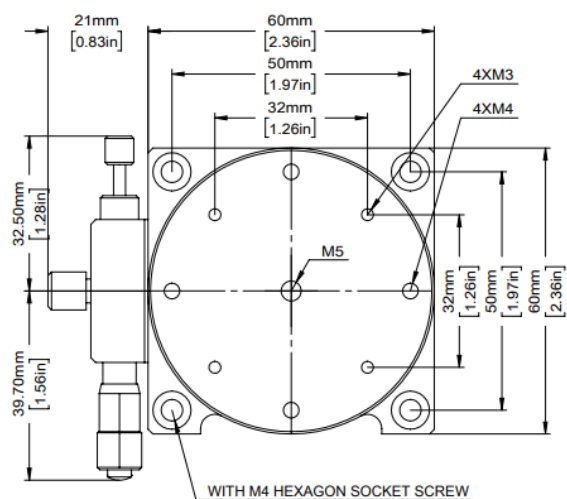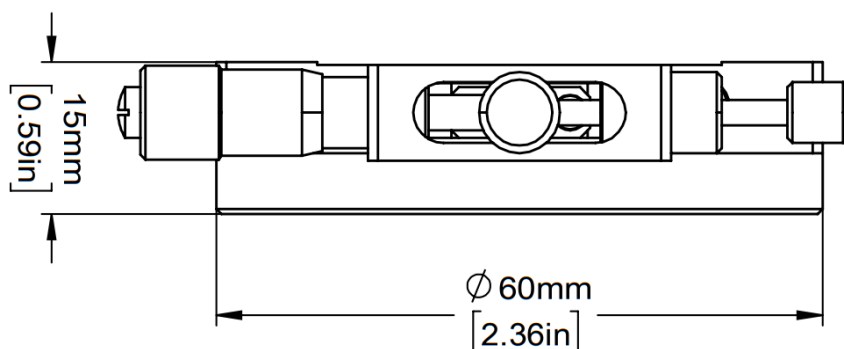




DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB60BL	
DRAWN	XBW	WEIGHT	SCALE
DATE	2021/1/20	0.16kg	1:1
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES			


Чертеж OMXB60BR

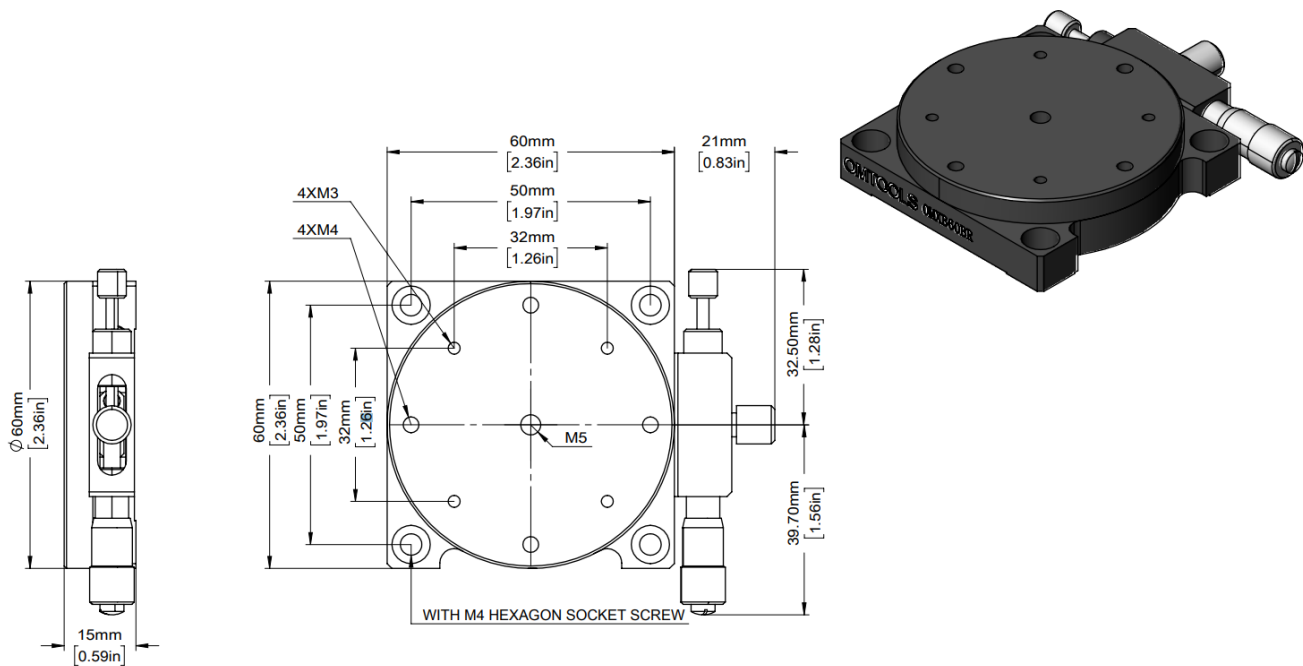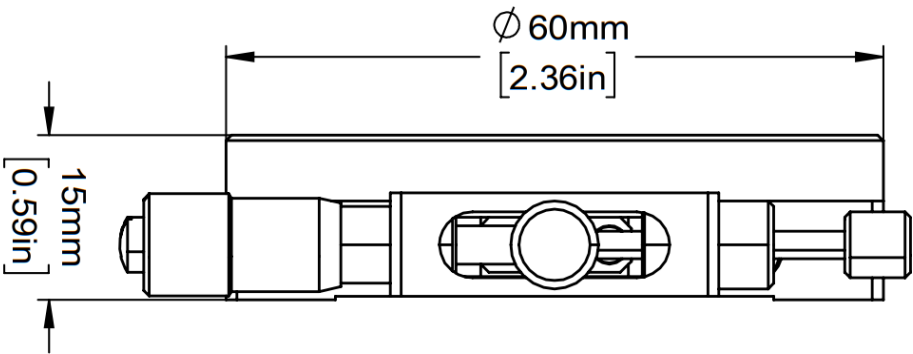



DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB60BR	
DRAWN	XBW		
DATE	2021/1/20	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.16kg	1:1

Чертеж OMXB90BL

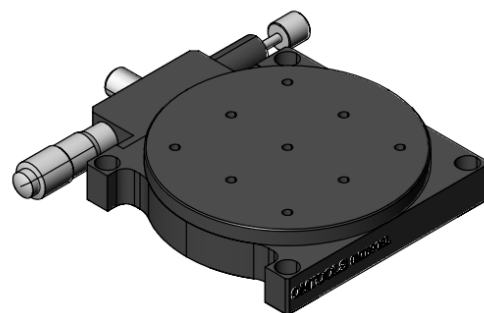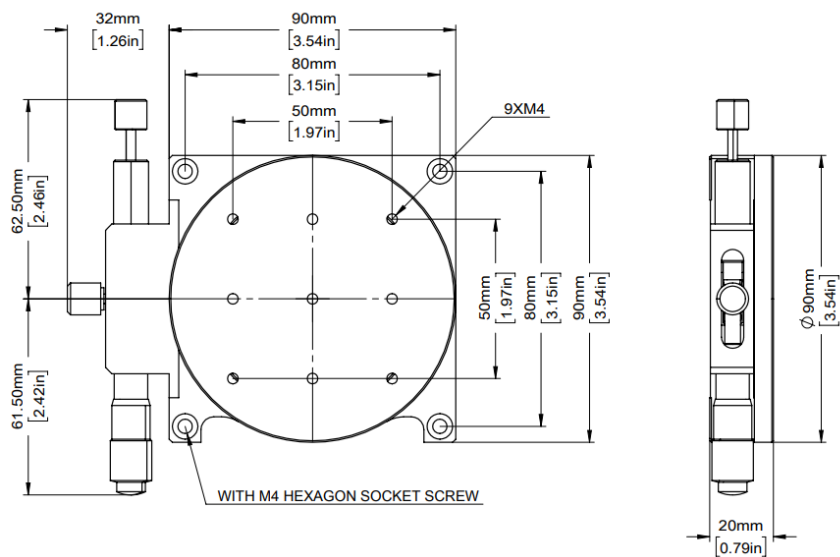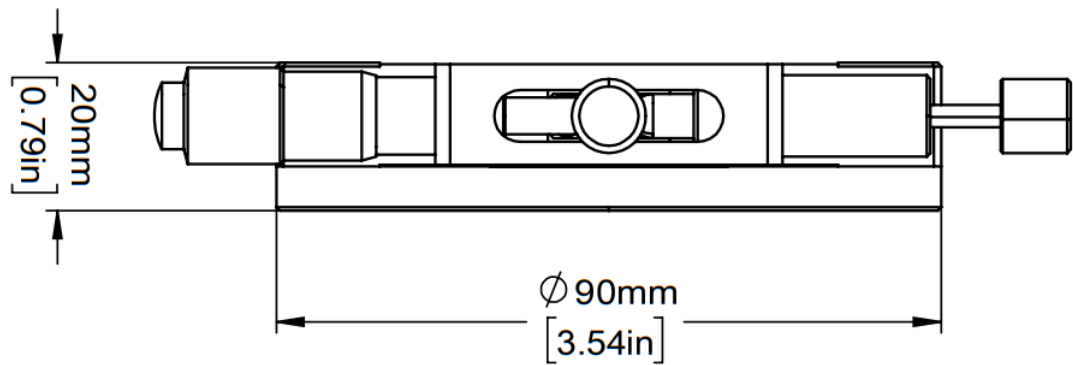




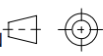
DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB90BL	
DRAWN	XBW	WEIGHT	SCALE
DATE	2021/1/20	0.5kg	1:1.5
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES			


Чертеж OMXB90BR

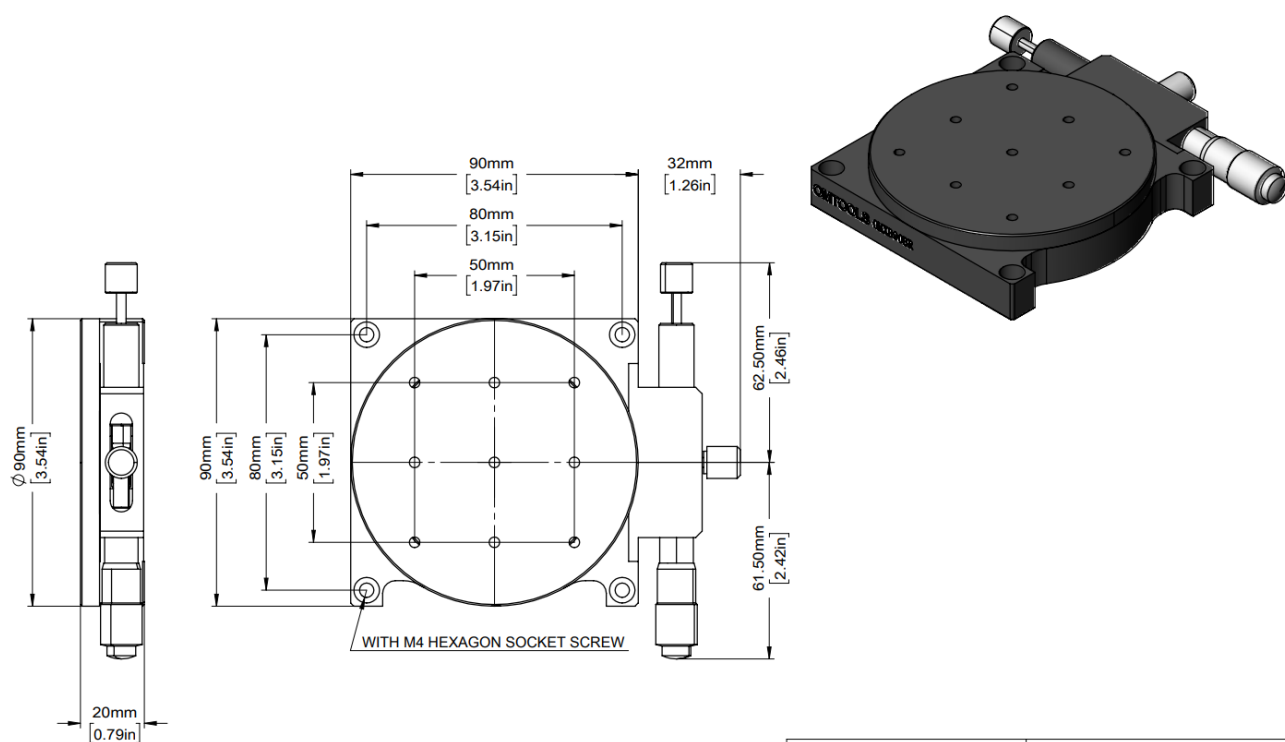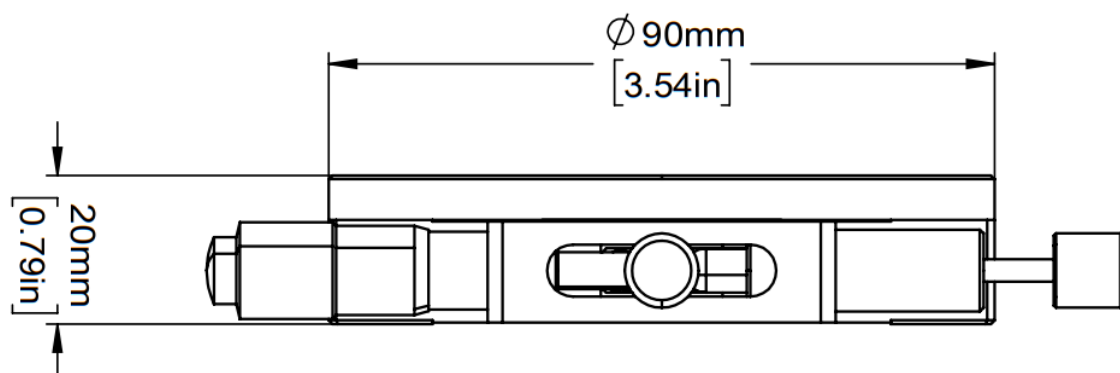




DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0		
DRAWN	XBW	OMXB90BR	
DATE	2021/1/20	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.5kg	1:1.5


Чертеж OMXB125BL

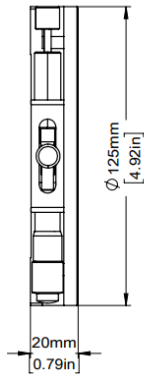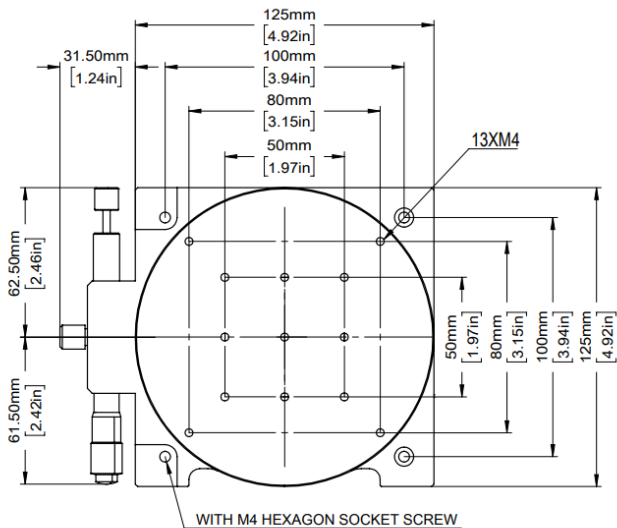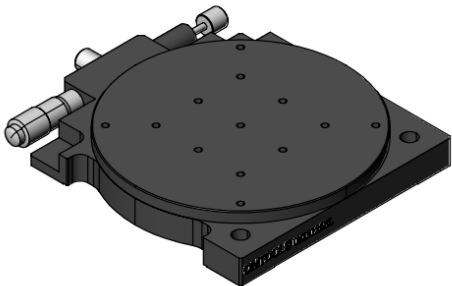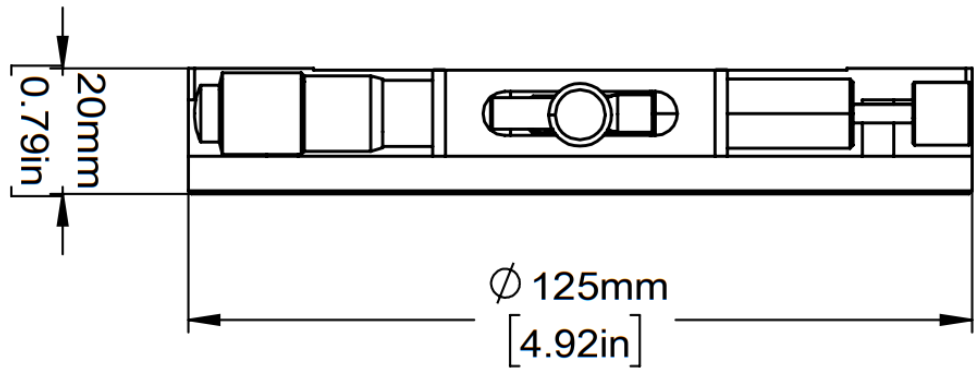

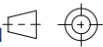DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB125BL	
DRAWN	XBW		
DATE	2021/1/20	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.9kg	1:2

Чертеж OMXB125BR

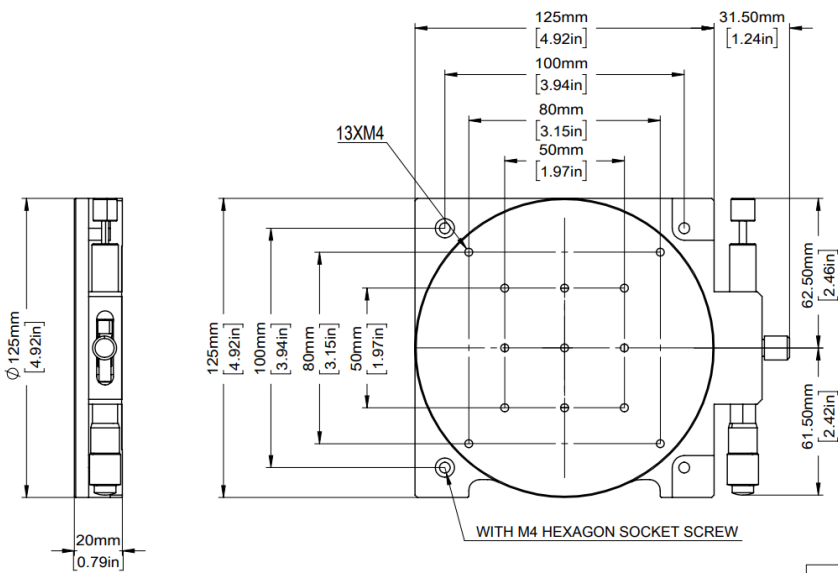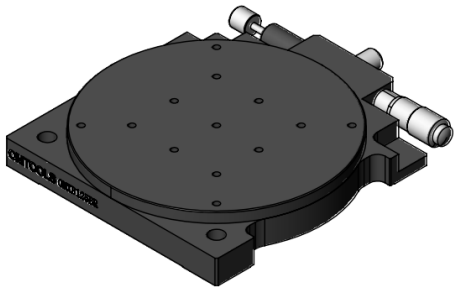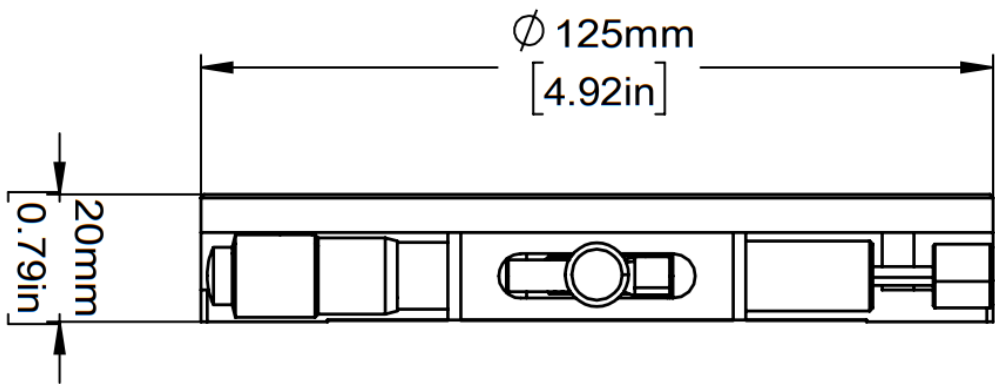

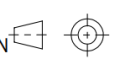DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB125BR	
DRAWN	XBW		
DATE	2021/1/20	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.9kg	1:2