


OMXB-C

Ручные вращательные платформы



OMXB100C(L/R)

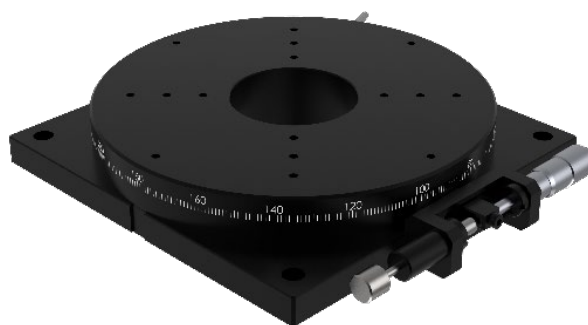

OMXB160C(L/R)

Преимущества серии

- Высокая чувствительность.
- Ультратонкий компактный дизайн.
- Совместимость с другими сериями.
- Диаметр платформы: 100/158 мм.
- Диапазон регулировки 360°, диапазон тонкой настройки $\pm 5^\circ$.
- Нагрузка 4 - 5 кг.

Описание серии

Серия ручных вращательных платформ OMXB-C обладает высокой чувствительностью, которая обеспечивается наличием в конструкции роликовой муфты и микрометрического винта. Ключевые параметры, такие как точность вращения, торцевое и радиальное биение, достигают наилучших значений среди ручных вращательных платформ данного класса на международном рынке. Подходит для решения задач в областях, где предъявляются высокие требования к регулировке угла вращения.




Основные параметры


Материал	Доралюминий	Обработка поверхности	Черное анодирование
Привод	Микрометрический винт	Концентричность	0,05
Диапазон грубой настройки, °	360	Диапазон тонкой настройки, °	± 5
Параллелизм	0,03		

Отличающиеся параметры моделей



Модель	OMXB100CL	OMXB100CR	OMXB160CL	OMXB160CR
Диаметр платформы, мм	100	100	158	158
Положение винта	Слева	Справа	Слева	Справа
Высота платформы, мм	20	20	30	30
Нагрузка, кг	4	4	5	5
Масса, кг	0,5	0,5	1,74	1,74
Дифференциальная шкала, ‘	0,53	0,53	0,36	0,36
Цена деления шкалы	5	5	1	1


Чертеж OMXB100CL

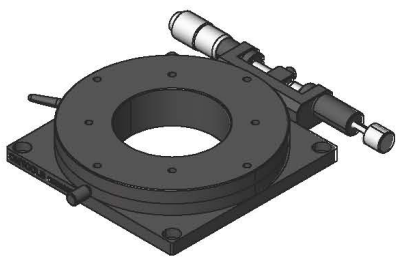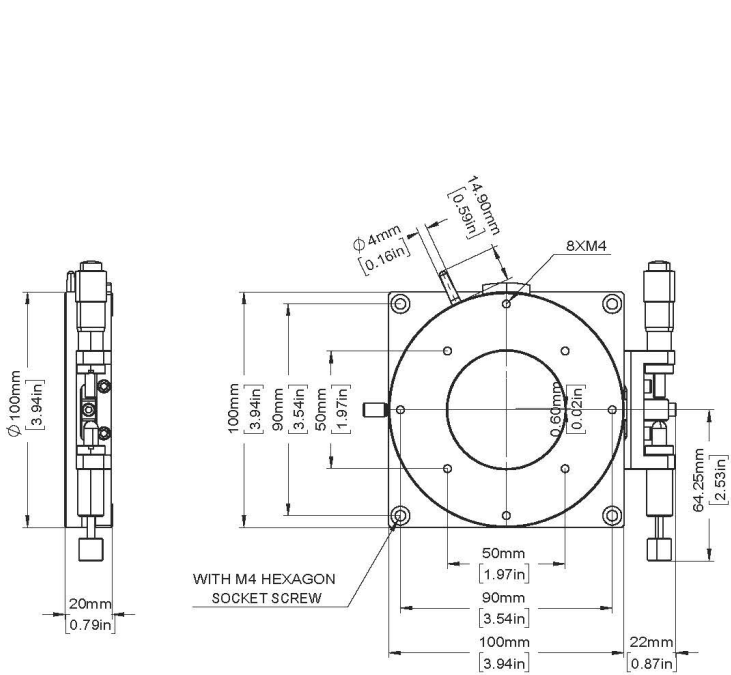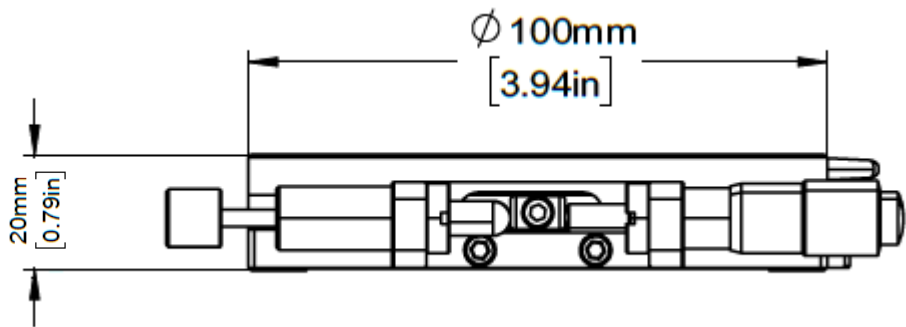


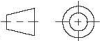
DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB100CL	
DRAWN	XBW		
DATE	2021/1/20	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.5kg	1:2

Чертеж OMXB100CR

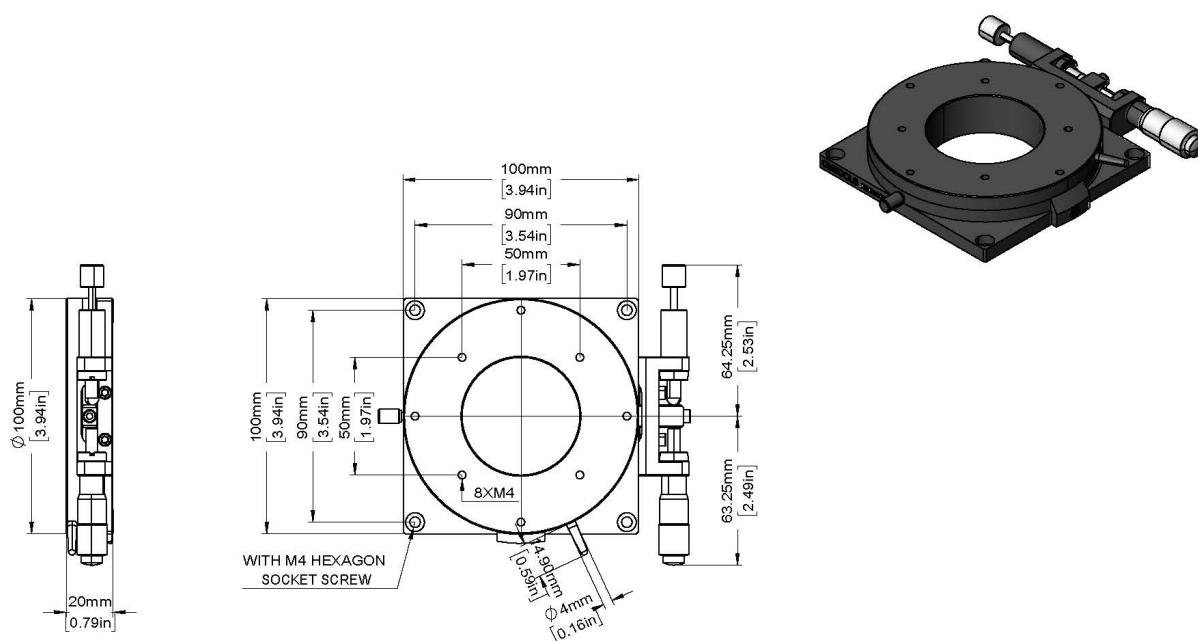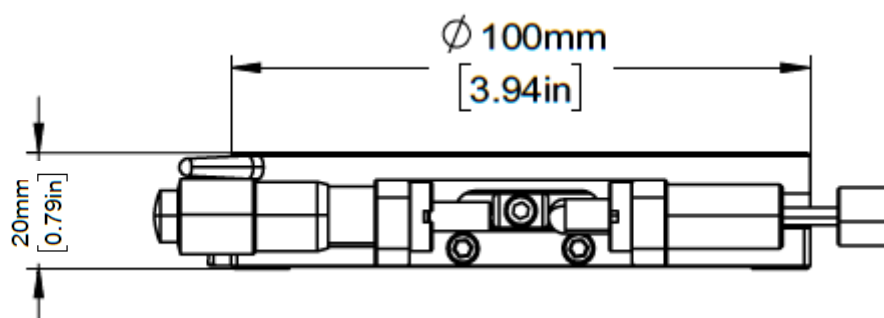

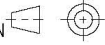DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB100CR	
DRAWN	XBW		
DATE	2021/1/20	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.5kg	1:2

Чертеж OMXB160CL

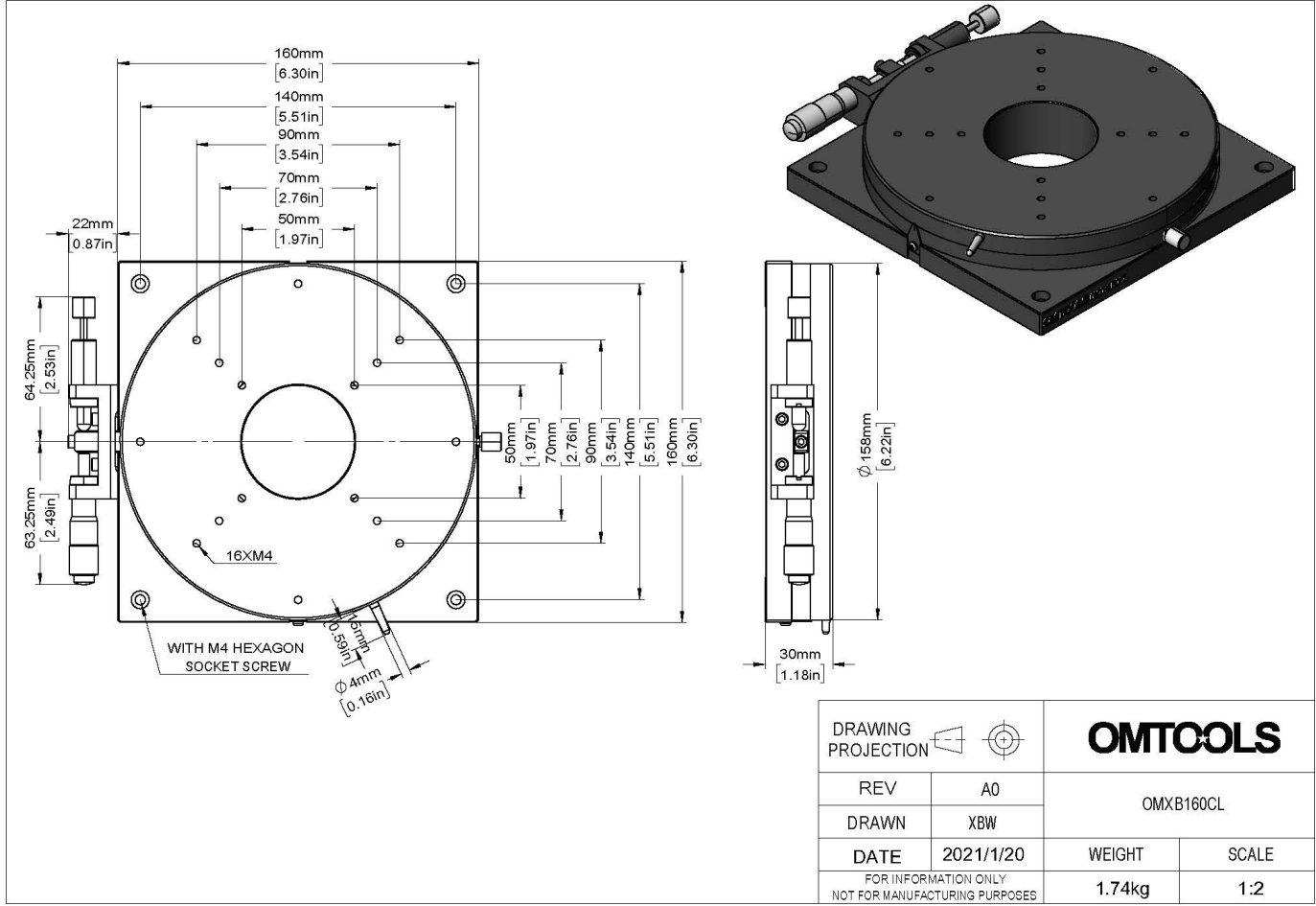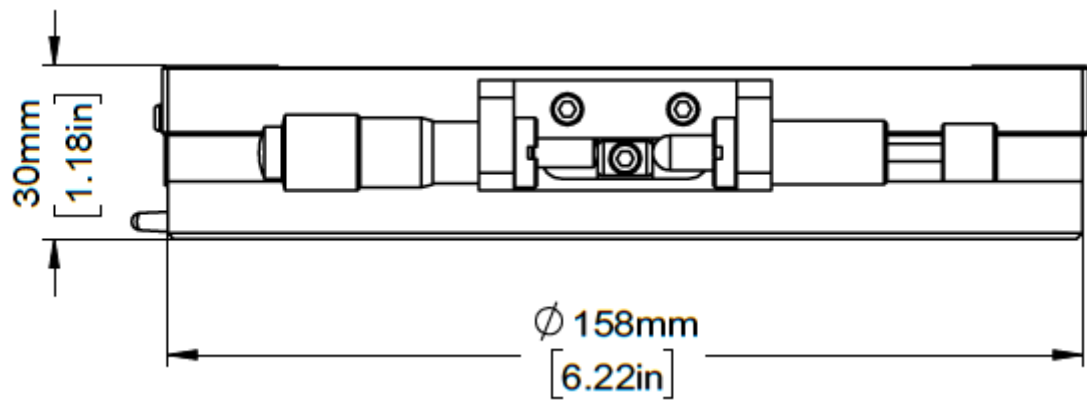

Чертеж OMXB160CR

