

OMQP

Регулируемые держатели призм



Преимущества серии

- Прочный и надежный корпус из алюминиевого сплава 6061-T6.
- Возможность установки оптических компонентов высотой до 70 мм.


Описание серии

Регулируемые держатели призм серии OMQP используются не только для установки призм, но и оптических элементов других форм. При использовании сначала ослабьте фиксирующий винт, поместите оптический элемент на платформу, переместите прижимной рычаг в нужное положение, затяните фиксирующий винт, а затем поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать призму. Устройство может быть установлено на кронштейн или оптическую плиту.

Параметры моделей

Модель	Диаметр платформы, мм	Максимальная высота призмы, мм	Материал
OMQP56A	56	30	Алюминиевый сплав 6061-T6
OMQP100B	100	70	Алюминиевый сплав 6061-T6

Чертеж OMQP56A

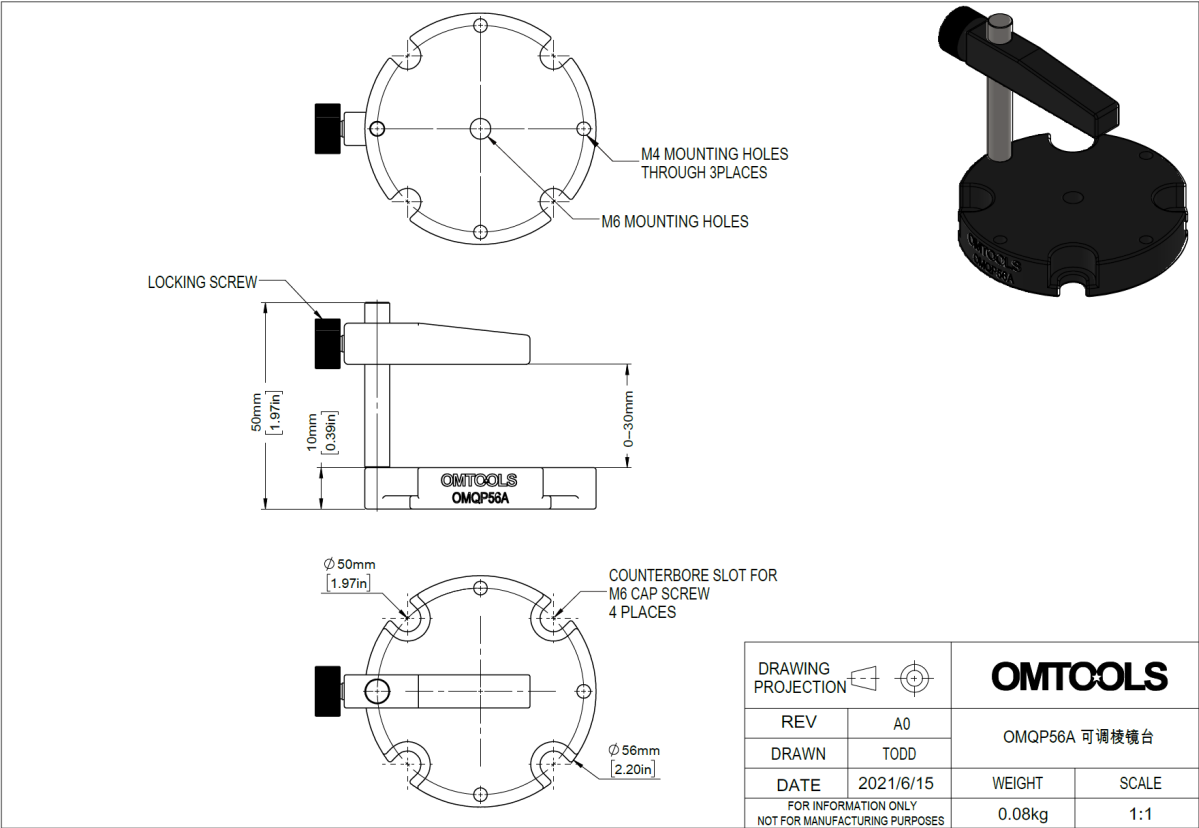

Чертеж OMQP100B

