

SPYZ65

Ручные линейные трансляторы



SPYZ65L



SPYZ65R

Преимущества серии

- Направляющая с поперечными роликами имеет высокую грузоподъемность, износостойкость и чувствительность.
- Изготовлены из алюминиевого сплава с черным анодированием, подходят для научных экспериментов по оптике и других областях, требующих высокой точности ручной настройки.
- Положение регулирующего винта: слева или справа.
- Диапазон перемещения 25 мм, размер платформы 65 x 65 мм.
- Общая толщина 20 мм, максимальная горизонтальная нагрузка 5 кг, максимальная вертикальная нагрузка 3,5 кг.

Описание серии

Сверхточные ручные линейные трансляторы серии SPYZ изготовлены из алюминиевого сплава с черным анодированием. Обладают высокой чувствительностью (менее 2 мкм) и компактным размером. В серии используются направляющие с поперечными роликами, приводятся в движение микрометрическим винтом. Платформы могут использоваться для перемещения по осям Y и Z.

Отличающиеся параметры моделей

Модель	SPYZ65L	SPYZ65R
Положение привода	Левый	Правый

Основные параметры




Основной материал и обработка поверхности	Алюминиевый сплав с черным анодированием	Параллелизм движения, пм	< 10
Направляющая	Поперечная роликовая	Отклонение, "	< 25
Диапазон перемещения, мм	25	Горизонтальная нагрузка, кг	5
Размер платформы, мм	65 x 65	Вертикальная нагрузка, кг	3,5
Толщина платформы, мм	20	Масса, кг	0,25
Цена деления, мм	0,01	Параллелизм, пм	< 30
Чувствительность, пм	< 2	Совместимость с адаптером по оси Z	OMLA01B

Аксессуары

- OMLA01B – Адаптер, 65 x 65 x 90 мм, совместим с SPYZ65L, SPYZ65R.

Чертеж SPYZ65L

TRANSLATION LOCKING THUMBSCREW
1.5mm [0.06in] HEX

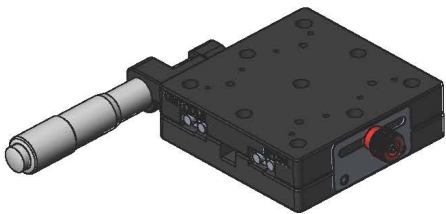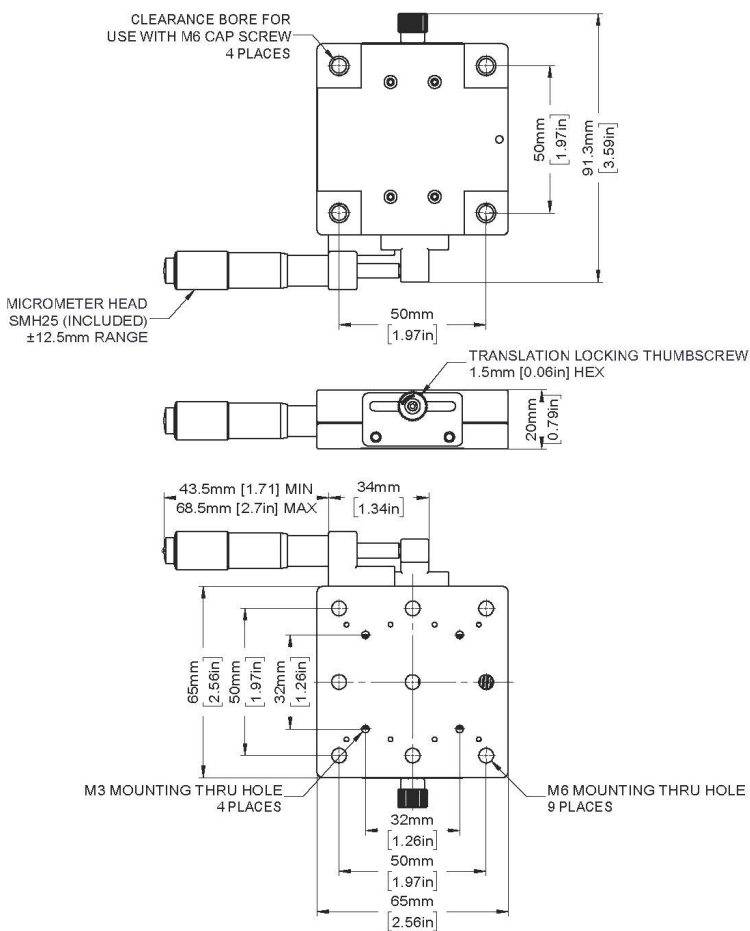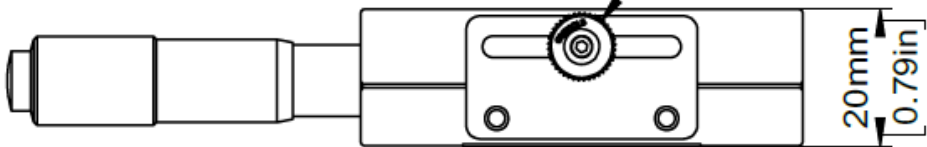

DRAWING PROJECTION				OMTOOLS	
REV	A0	SPYZ65L 手动位移台			
DRAWN	HSY				
DATE	2021/8/5	WEIGHT	SCALE		
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.21kg	5:8		

Чертеж SPYZ65R

