


OMXB-D

Ручные вращательные платформы



OMXB85D(L/R)

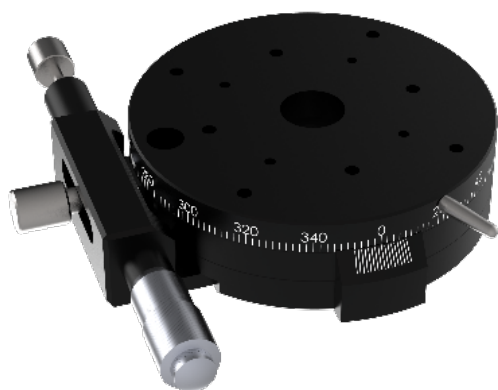

OMXB110D(L/R)

Преимущества серии

- Высокая чувствительность.
- Ультратонкий компактный дизайн.
- Совместимость с другими сериями.
- Диаметр платформы: 80/110 мм.
- Диапазон регулировки 360°, диапазон тонкой настройки $\pm 5^\circ$.
- Нагрузка 4 кг.

Описание серии

Серия ручных вращательных платформ OMBX-D обладает высокой чувствительностью, которая обеспечивается наличием в конструкции роликовой муфты и микрометрического винта. Ключевые параметры, такие как точность вращения, торцевое и радиальное биение, достигают наилучших значений среди ручных вращательных платформ данного класса на международном рынке. Подходит для решения задач в областях, где предъявляются высокие требования к регулировке угла вращения.





Основные параметры


Материал	Доралюминий	Обработка поверхности	Черное анодирование
Привод	Микрометрический винт	Концентричность	0,04
Диапазон грубой настройки, °	360	Диапазон тонкой настройки, °	±5
Высота платформы, мм	25	Цена деления шкалы, ‘	5
Параллелизм	0,03	Нагрузка, кг	4

Отличающиеся параметры моделей



Модель	OMXB85DL	OMXB85DR	OMXB110DL	OMXB110DR
Диаметр платформы, мм	80	80	110	110
Положение винта	Слева	Справа	Слева	Справа
Дифференциальная шкала, ‘	0,72	0,72	0,57	0,57
Масса, кг	0,51	0,51	0,8	0,8


Чертеж OMXB85DL

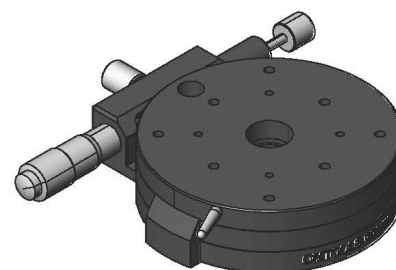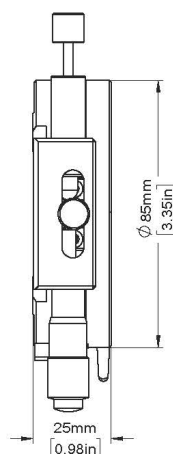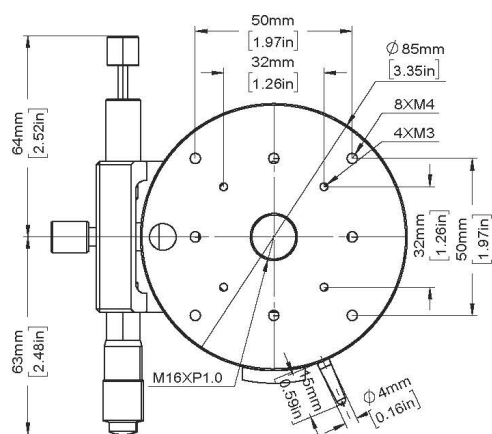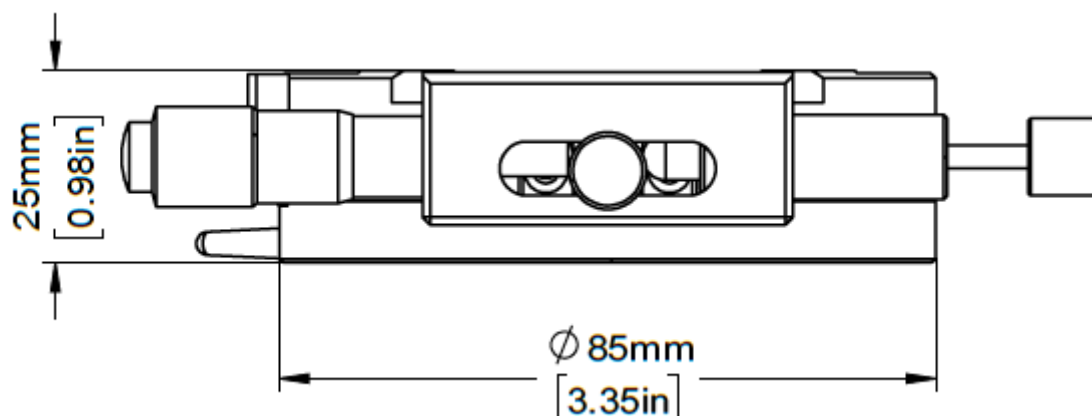




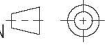
DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB85DL	
DRAWN	XBW		
DATE	2021/1/20	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		0.51kg	1:1.5

Чертеж OMXB85DR

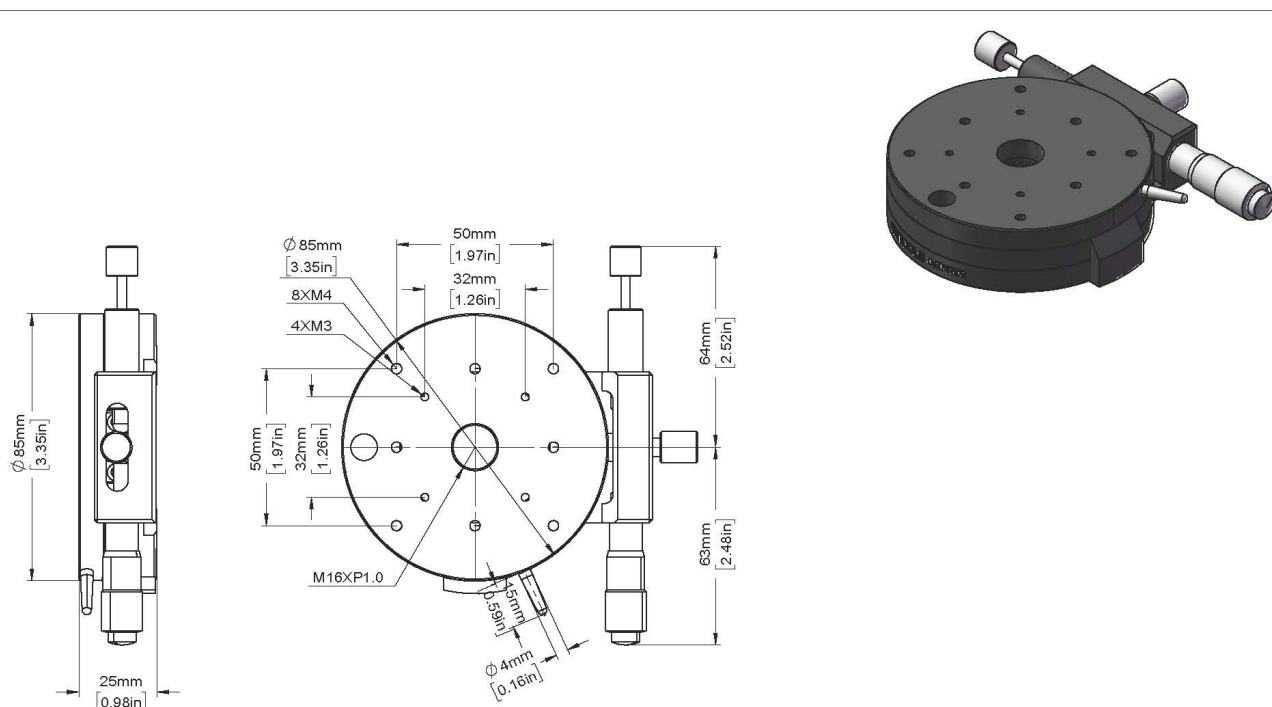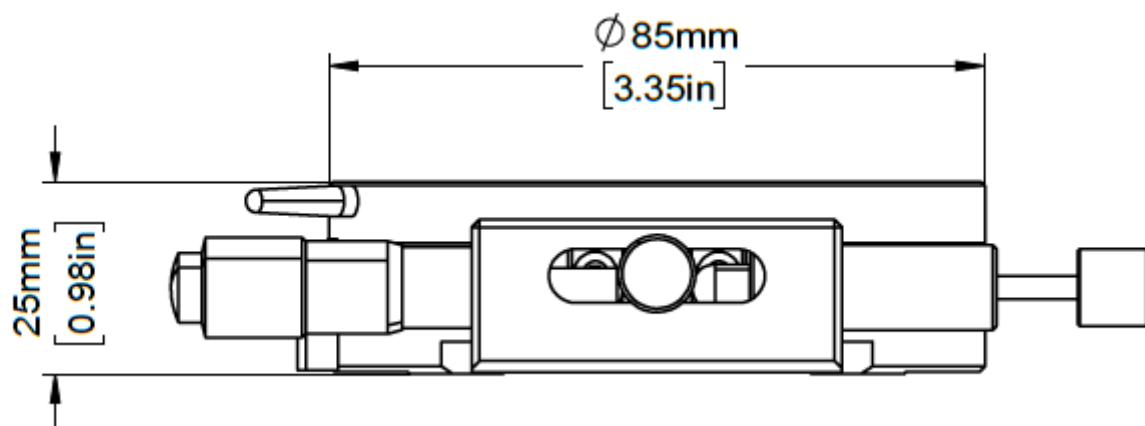

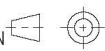DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB85DR	
DRAWN	XBW	WEIGHT	SCALE
DATE	2021/1/20	0.51kg	1:1.5
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES			

Чертеж OMXB110DL

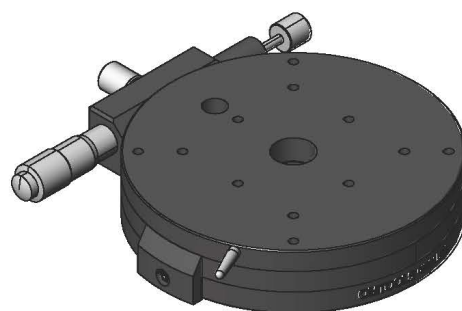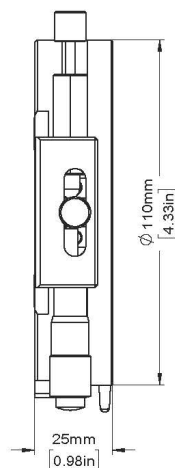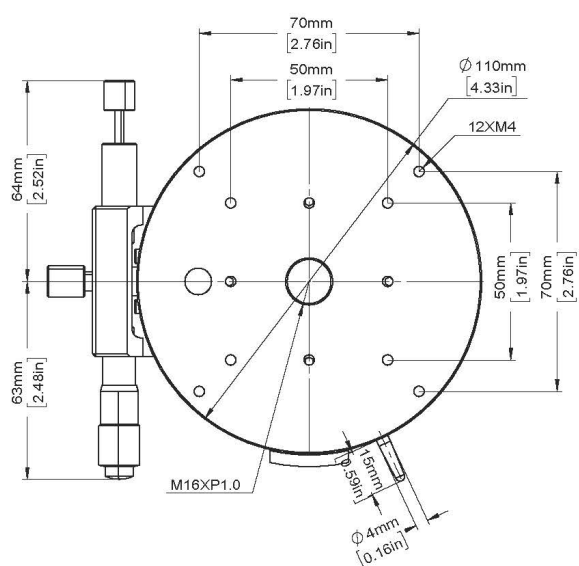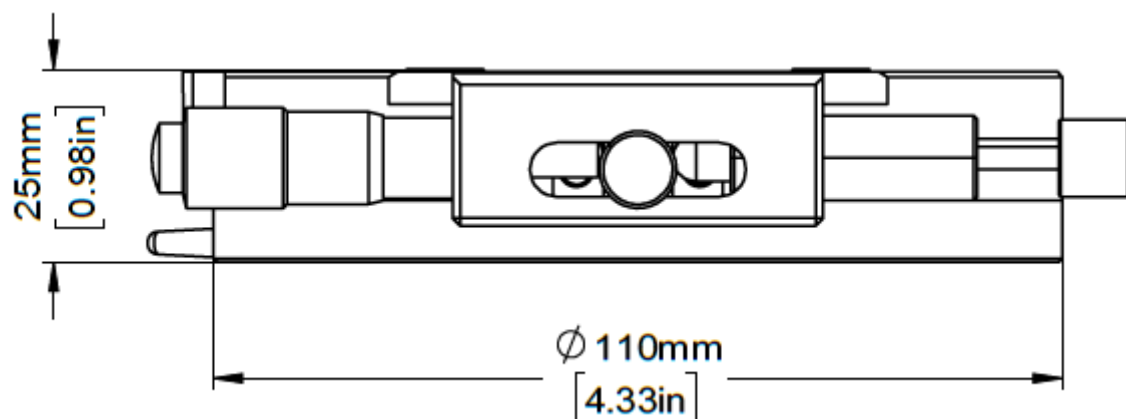

DRAWING
PROJECTION

REV A0

DRAWN XBW

DATE 2021/1/20

FOR INFORMATION ONLY
NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES

OMTOOLS

OMXB110DL




WEIGHT


0.8kg

SCALE

1:1.5

Чертеж OMXB110DR

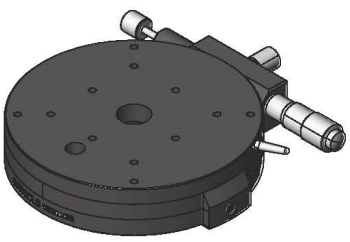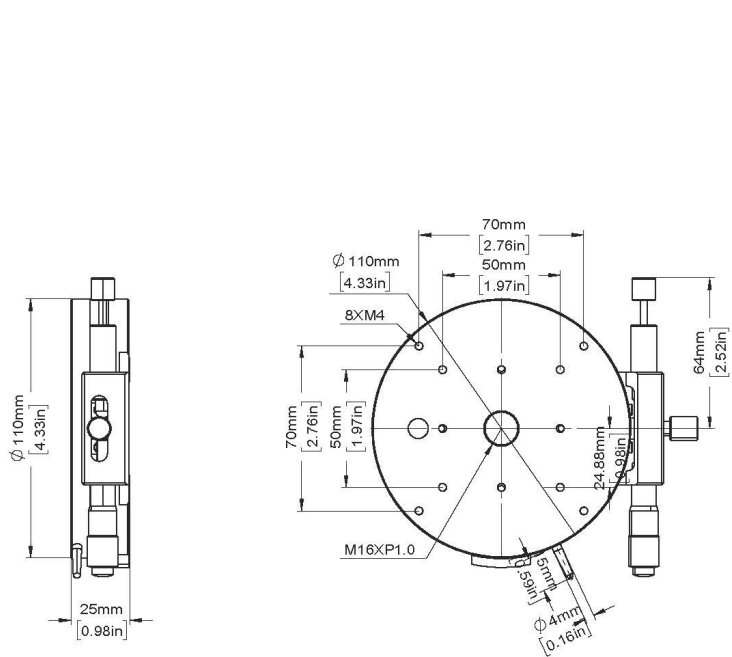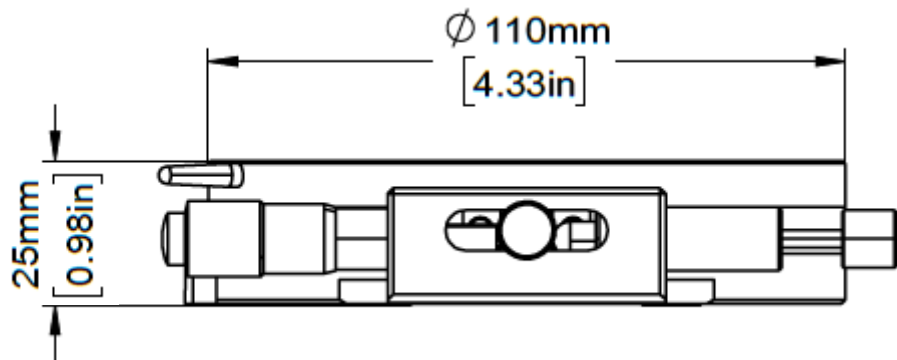

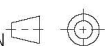DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMXB110DR	
DRAWN	XBW	WEIGHT	SCALE
DATE	2021/1/20	0.8kg	1:2
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES			