

HGZC

Пневматические виброизоляторы



Преимущества серии

- Двухкамерный дизайн «воздушной подушки».
- Низкая собственная частота 3 – 5 Гц.
- Высокая точность выравнивания, автоматическая регулировка высоты.
- Большая грузоподъемность.
- Длительный срок службы.
- Простая и быстрая установка.

Описание серии

Пневматические виброизоляторы серии **HGZC** отличаются двухкамерным устройством «воздушной подушки», длительным сроком службы и малым весом, а прецизионный клапан горизонтальной регулировки гарантирует точную настройку высоты. Устройства легко интегрируются в любые прецизионные системы для высокочастотной виброизоляции. Они обладают высокой грузоподъемностью, низкой собственной частотой, быстрым динамическим откликом. Простота монтажа и настройки делает их удобными в эксплуатации, а после первоначальной регулировки уровня устройство автоматически корректирует его при последующем использовании. В серии **HGZC** представлены модели виброизоляторов с клапаном горизонтальной регулировки и без него, а также комплект из четырех виброизоляторов.


Основные характеристики

Размеры монтажного основания, мм	108x108	Резьба центрального отверстия	M12
Диаметр воздушной трубки, мм	6	Собственная частота, Гц	3 – 5
Нагрузка, кг	250 – 350		

Отличающиеся параметры моделей

Модель	HGZC130A	HGZC130B	HGZC130C
Количество виброизоляторов, шт.	1	1	4
Количество клапанов горизонтальной регулировки, шт.	1	Нет	3
Размеры виброизолятора, мм	130x212,5x100	130x130x100	-
Конфигурация	-	-	HGZC130A – 3 шт. HGZC130B – 1 шт.
Масса, кг	3,45	3,11	13,7

Чертеж HGZC130A

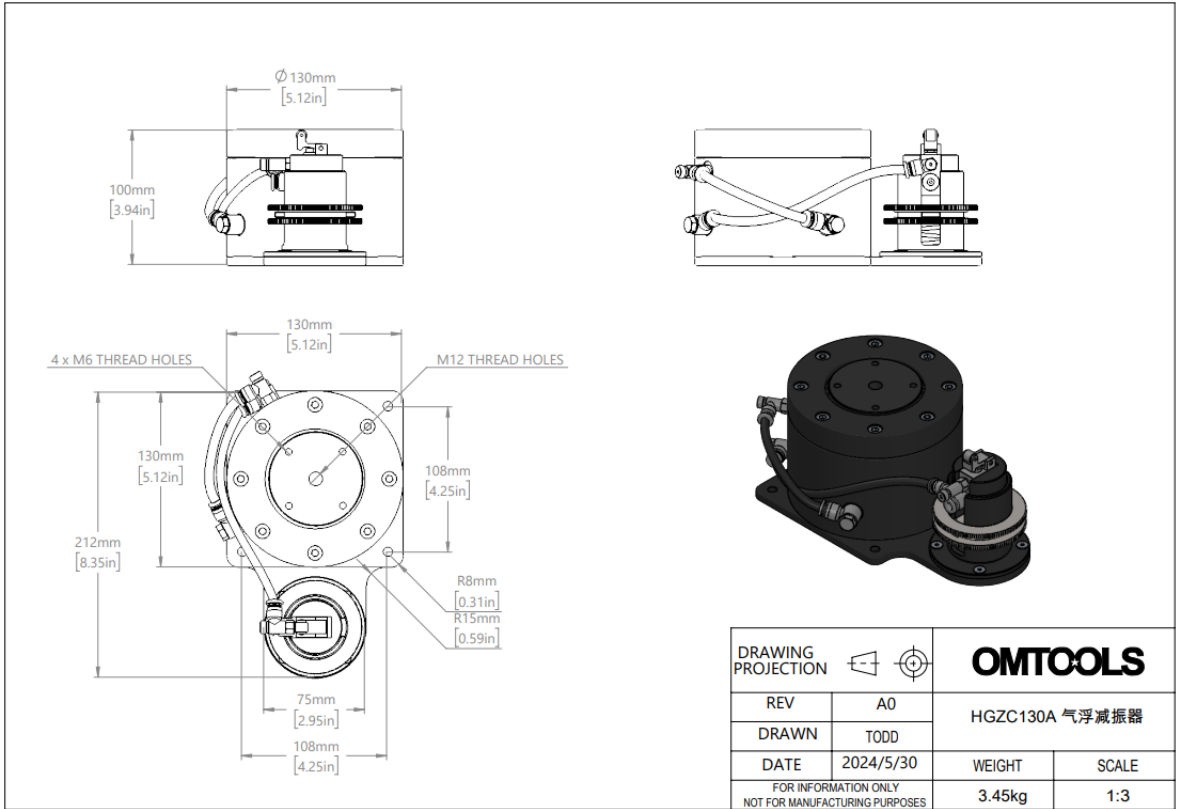

Чертеж HGZC130B

