


SPYB

Ручные линейные трансляторы



SPYB25

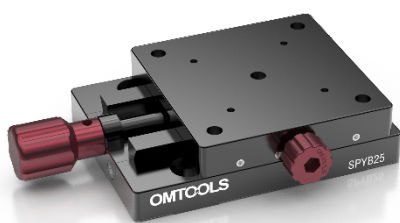

SPYB50



SPYB75



SPYB100

Преимущества серии

- Направляющая типа «ласточкин хвост», высокая грузоподъемность.
- Центральный привод, хорошие механические характеристики.
- Оснащен шкалой, удобное и быстрое считывание.
- Механизм блокировки и высокая стабильность.

Описание серии

Серия SPYB изготавливаются на направляющих типа «ласточкин хвост» и представляют собой ручные линейные трансляторы с винтовой гайкой. Основной материал, из которого изготовлена данная серия ручных линейных трансляторов – алюминиевый сплав с черным анодированием. Серия проста в использовании и обладает высокой чувствительностью и грузоподъемностью, а также имеет функцию блокировки.

Отличающиеся параметры моделей



Модель	SPYB25	SPYB50	SPYB75	SPYB100
Диапазон перемещения, мм	25	50	75	100
Длина корпуса, мм	90	115	140	165
Совместимая монтажная плата-адаптер по оси Z	OMLA01B	OMLA01B	OMLA02B	OMLA02B

Основные параметры



Направляющие	Типа «ласточкин хвост»	Привод	Винт с наружной резьбой, ф8×4
Материал	Алюминиевый сплав Черное анодирование	Положение привода	Центральный
Размер платформы, мм	65 x 65	Горизонтальная нагрузка, кг	10
Толщина, мм	20	Вертикальная нагрузка, кг	5



Аксессуары

- OMLA01B – Адаптер, 65 x 65 x 90 мм, совместим со SPYB25, SPYB50
- OMLA02B – Адаптер, 65 x 65 x 120 мм, совместим со SPYB75, SPYB100

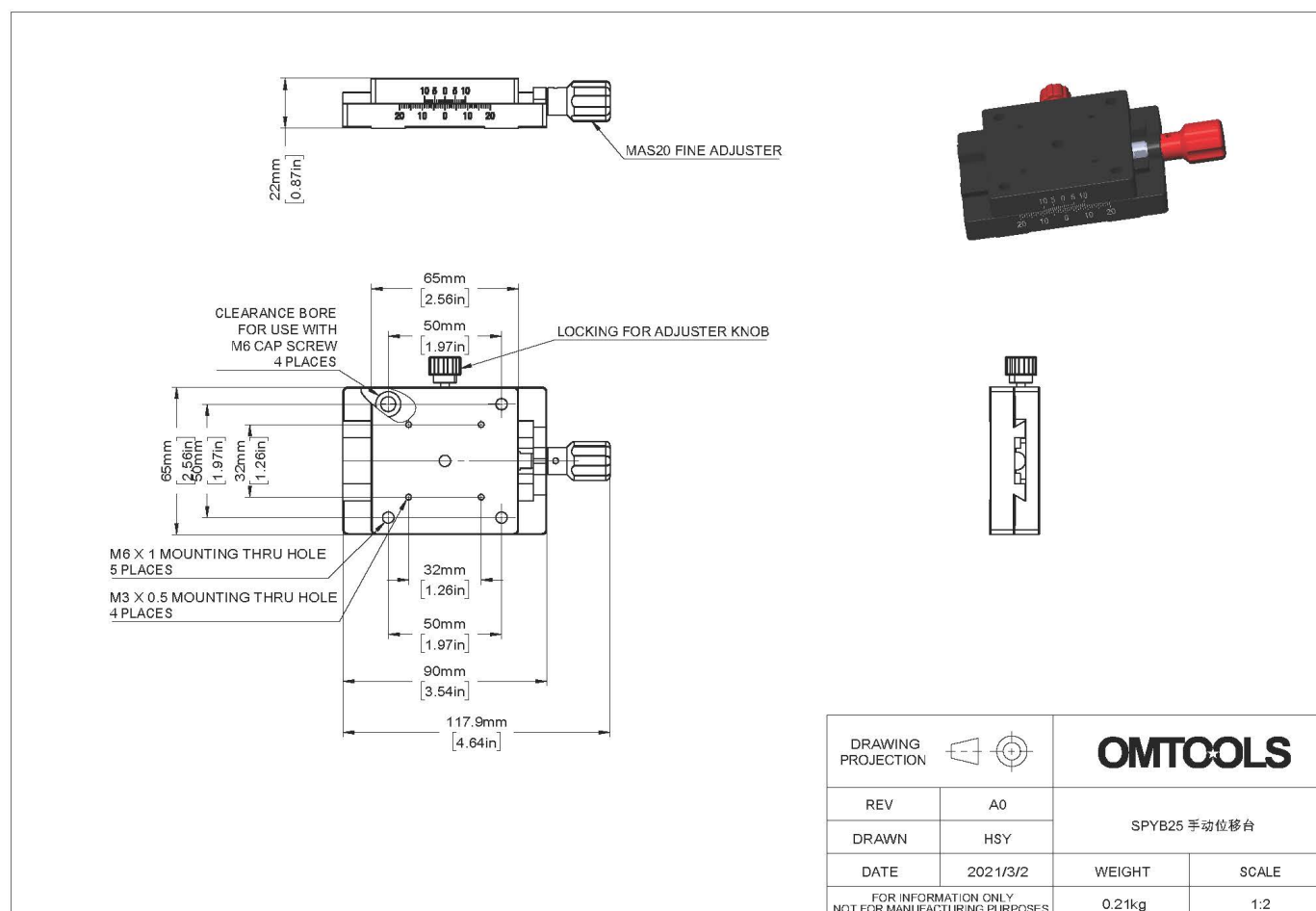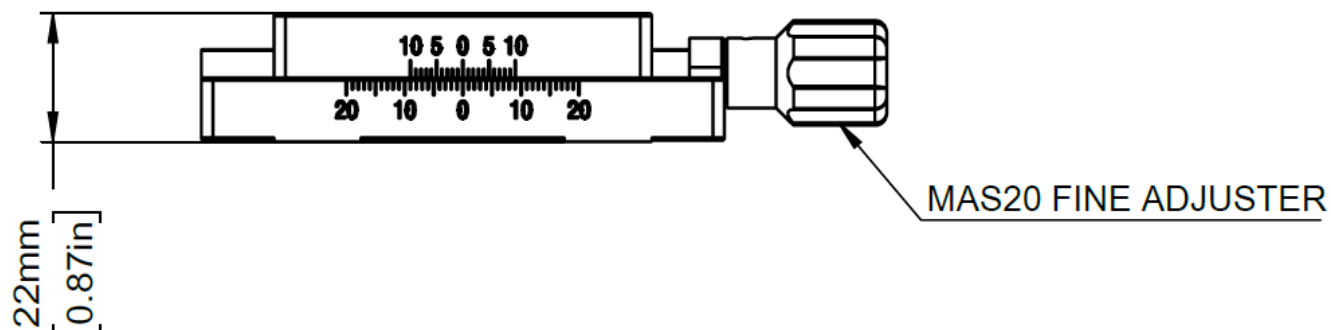

Чертеж SPYB50

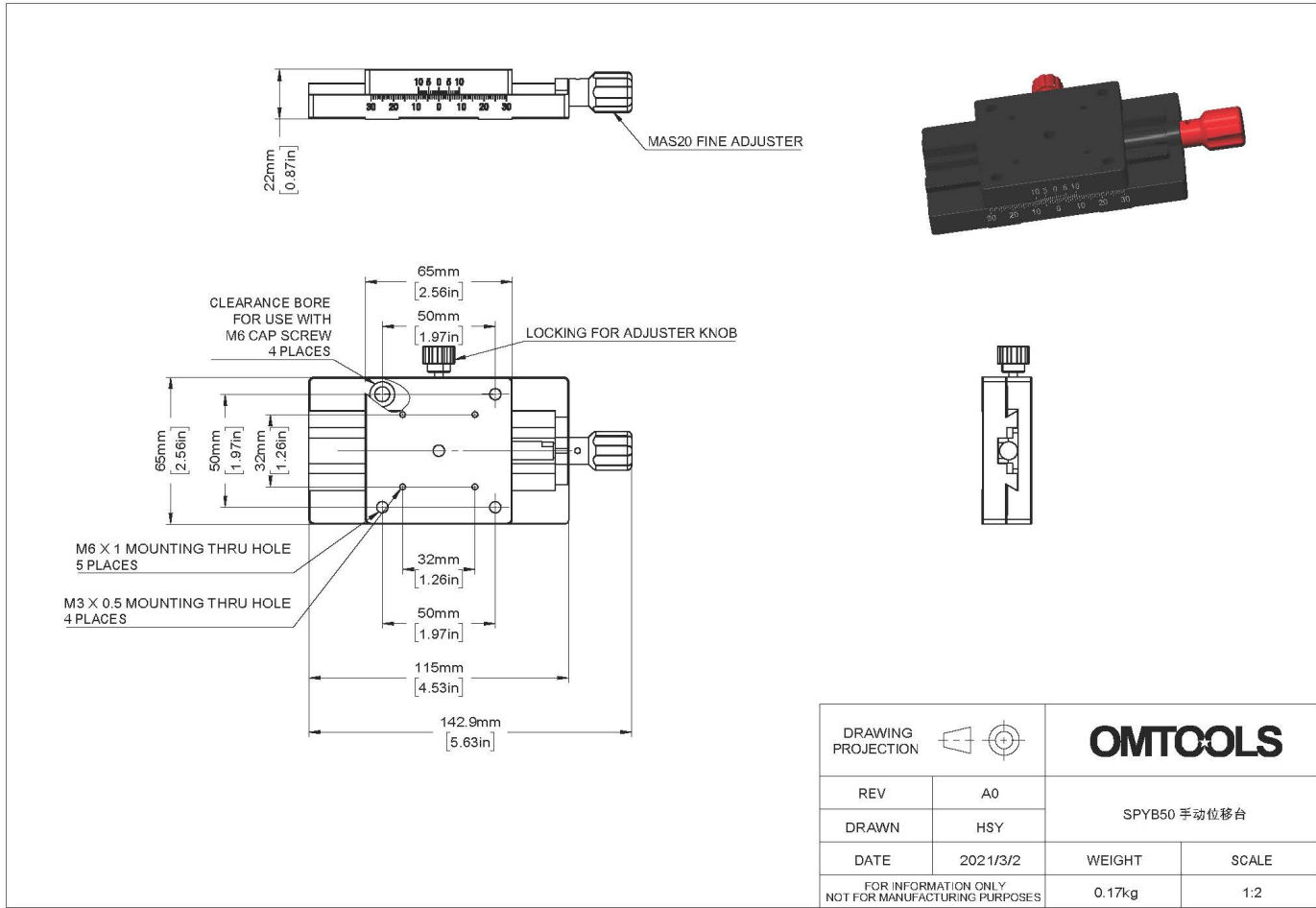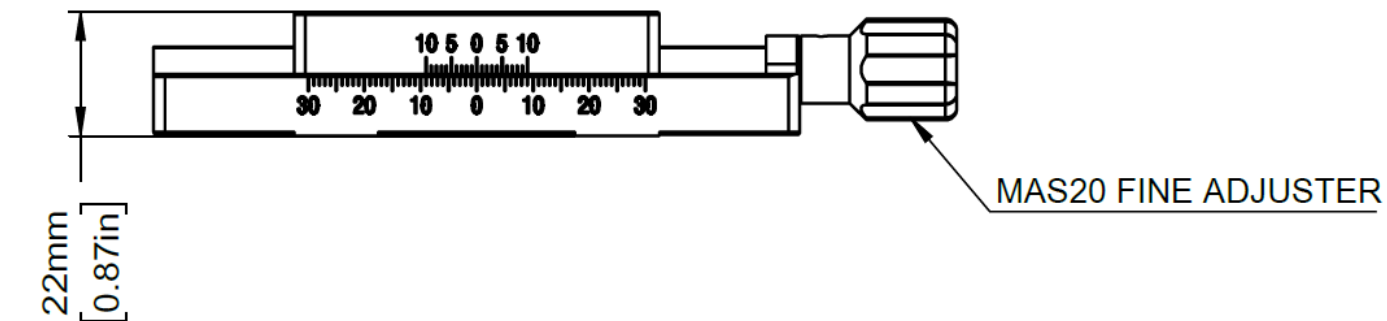

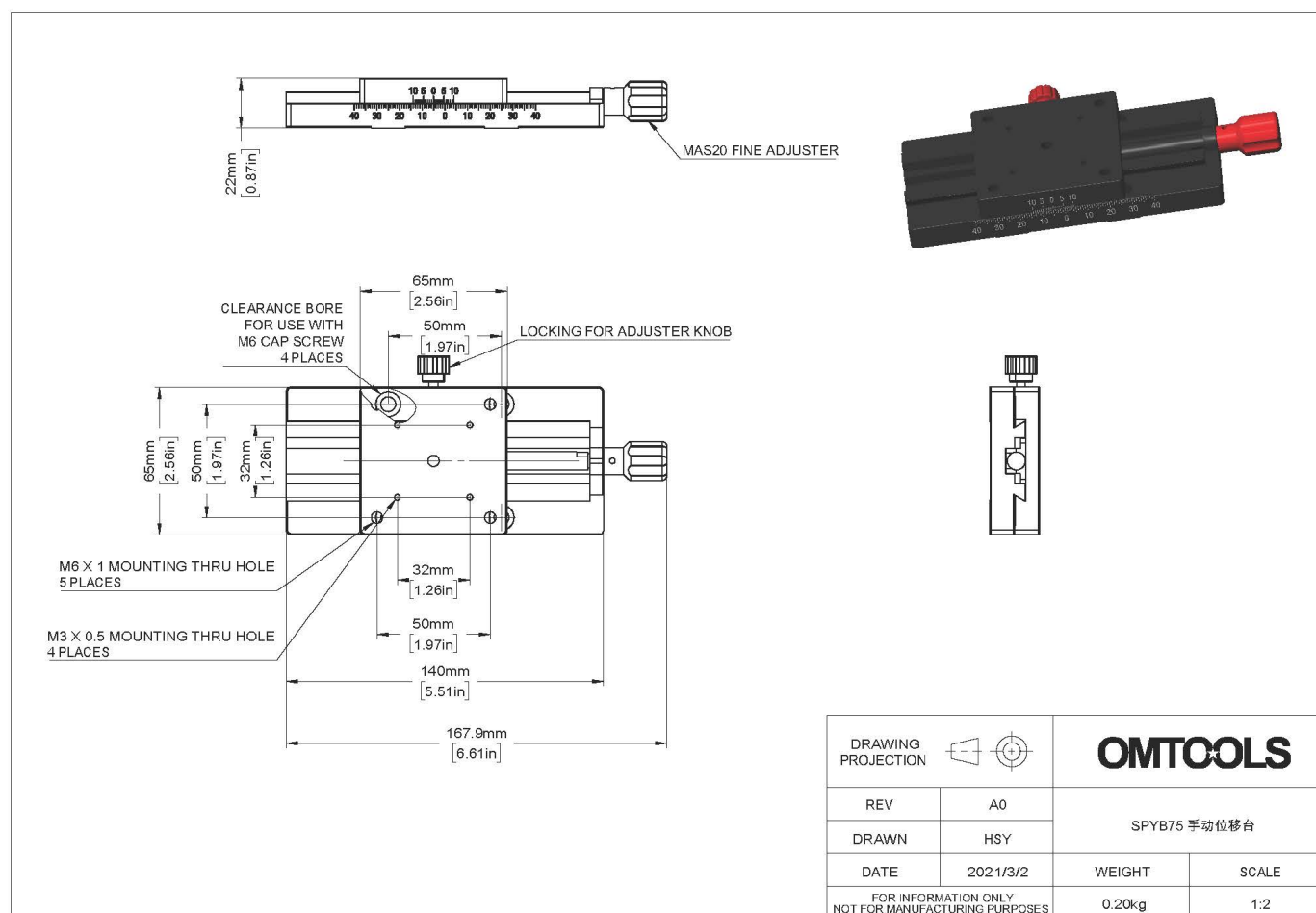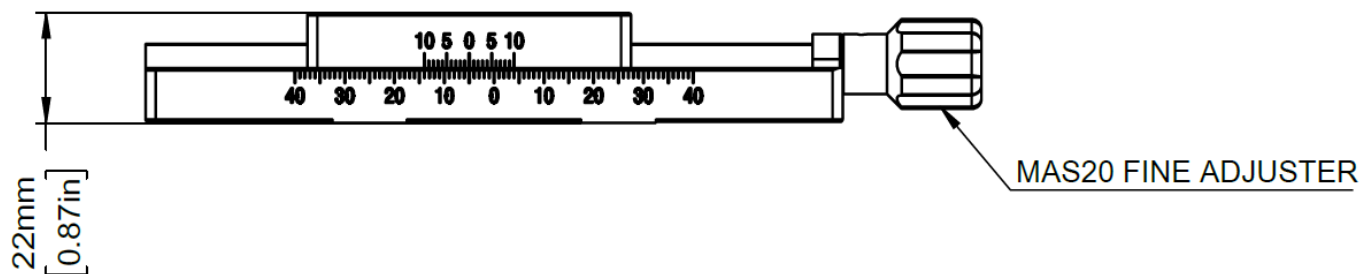

Чертеж SPYB100

