

SPYC40

Ручные линейные трансляторы



SPYC4040



SPYC4060



SPYC4090

Преимущества серии

- Направляющая типа «ласточкин хвост».
- Большой выбор диапазона перемещения.
- Высокая грузоподъемность.
- Реечная передача, высокая скорость регулировки.
- Со шкалой считывать данные удобно и быстро.
- Функция блокировки, высокая стабильность.
- Компактные размеры платформы 25 x 42 мм.
- Толщина 24 мм.
- Горизонтальная нагрузка до 3 кг.

Описание серии

Ручные линейные трансляторы серии SPYC оснащены направляющей типа «ласточкин хвост» и изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава с черным анодированием. Трансляторы обладают большой грузоподъемностью, высокой скоростью регулировки. Сбоку есть шкала и функция блокировки с хорошей стабильностью. Монтажные отверстия со стандартным шагом распределены по платформе и основанию, что удобно для установки и комбинирования с другими компонентами.

Отличающиеся параметры моделей

Модель	SPYC4040	SPYC4060	SPYC4090
Длина, мм	40	60	90
Размер платформы, мм	40 x 40	40 x 60	40 x 90
Диапазон перемещения, мм	20	40	60
Масса, кг	0,21	0,27	0,36





Основные параметры

Направляющая	Типа «ласточкин хвост»	Толщина платформы, мм	34
Материал	Алюминиевый сплав Черное анодирование	Цена деления, мм	0,1
Привод	Реечный	Положение привода	Боковой
Горизонтальная нагрузка, кг	5	Совместимость с монтажной платой-адаптером	OMLA07

Аксессуары





- OMLA07 – Адаптер, 65 x 120 x 10 мм, совместим с SPYC4040, SPYC4060, SPYC4090/

Чертеж SPYC4040

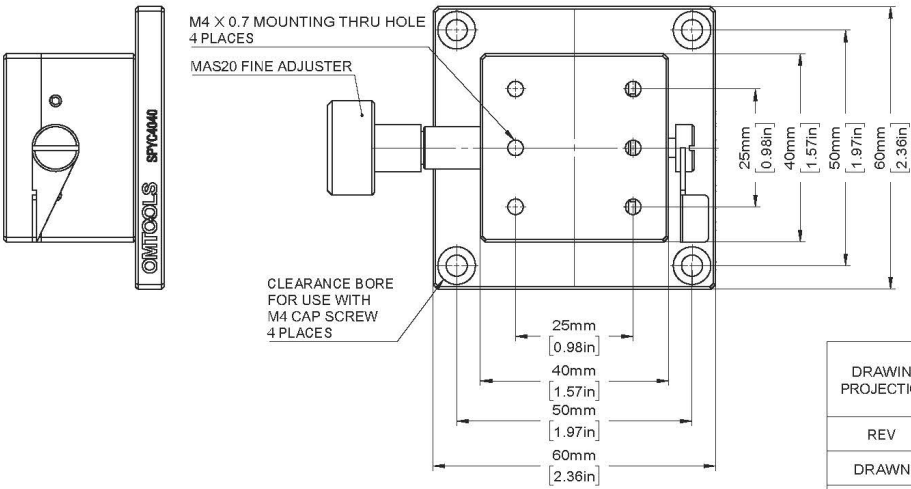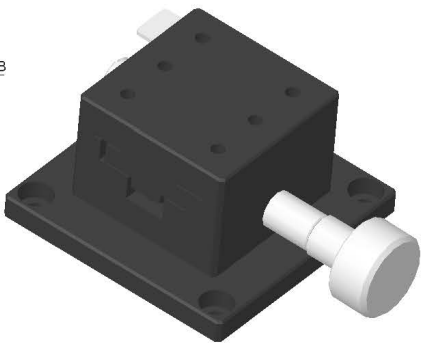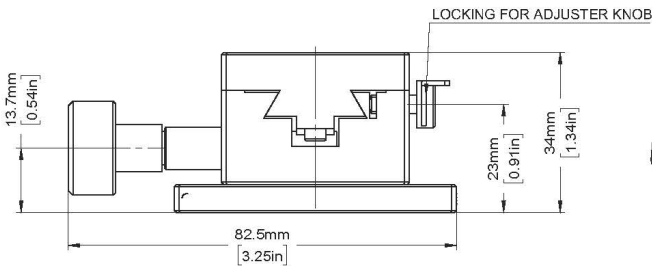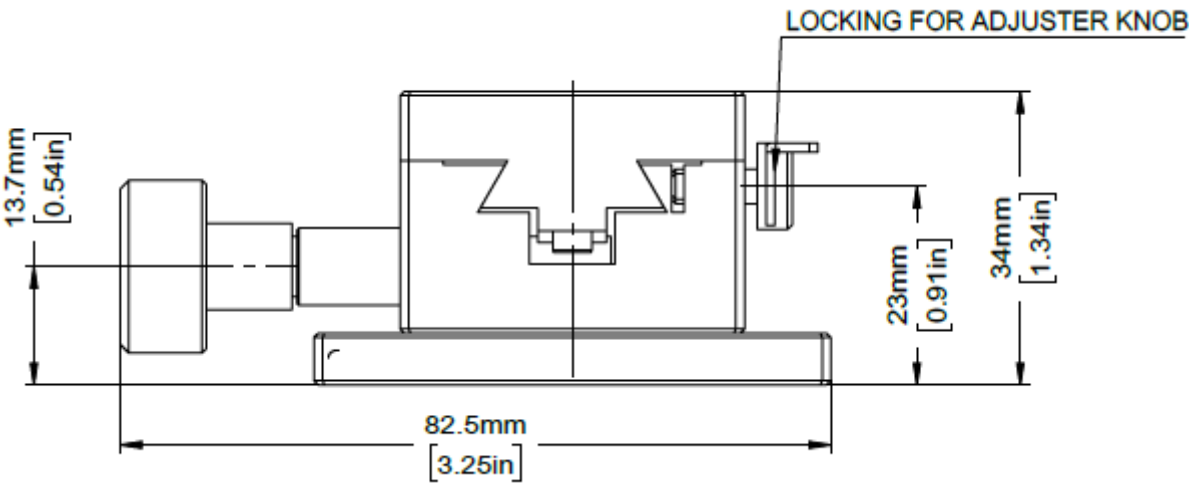

DRAWING PROJECTION		OMTOOLS	
REV	A0		
DRAWN	HSY	SPYC4040	
DATE	2020/7/28	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		kg	1:1



Чертеж SPYC4060

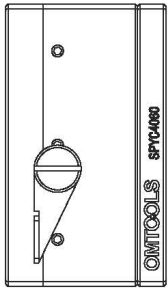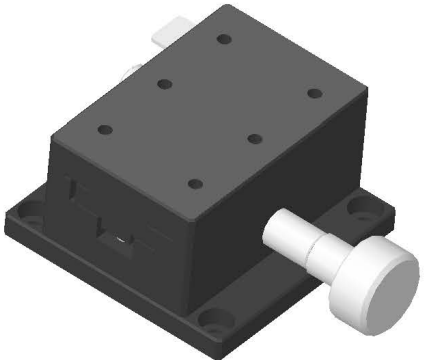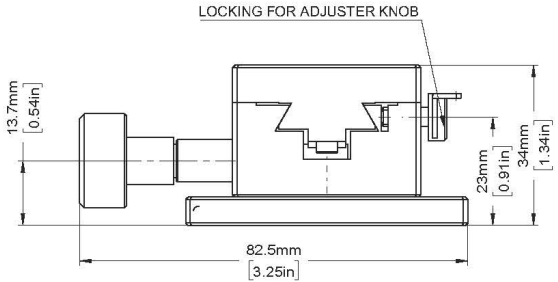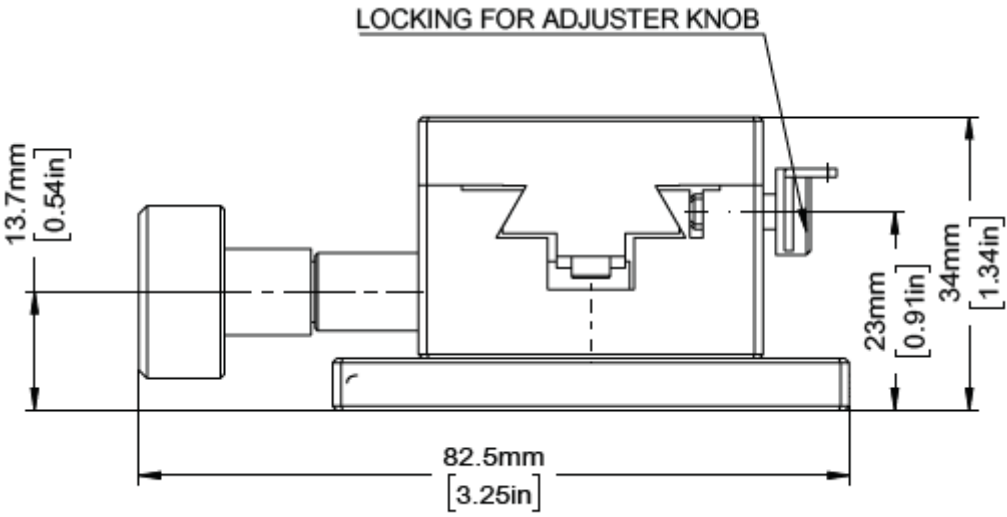

M4 X 0.7 MOUNTING THRU HOLE
4 PLACES

MAS20 FINE ADJUSTER

CLEARANCE BORE
FOR USE WITH
M4 CAP SCREW
4 PLACES

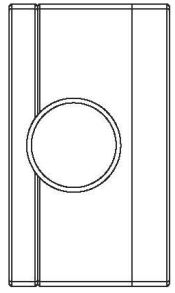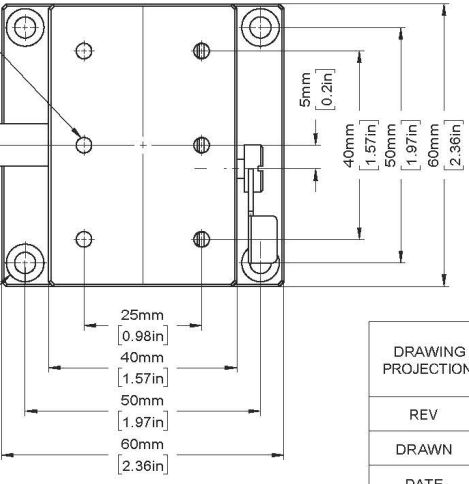

DRAWING PROJECTION		OMTOOLS	
REV	A0		
DRAWN	HSY	SPYC4060	
DATE	2020/7/28	WEIGHT	SCALE
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES		kg	1:1

Чертеж SPYC4090

