

OMT43E

Регулируемый самоцентрирующийся держатель оптики



Преимущества серии

- Материал: алюминиевый сплав 6061-T6.
- Диаметр оптики от 3,8 мм до 46 мм.
- Три регулятора M6x0,25 мм обеспечивают регулировку угла тангажа/рыскания в диапазоне $\pm 4^\circ$, положение можно зафиксировать.
- На нижней части три резьбовых отверстия M6 и потайные отверстия M4.



Описание

Самоцентрирующиеся держатели OMT43E позволяют быстро устанавливать и извлекать оптические компоненты с диаметром от 3,8 до 46 мм. Зажимной блок с пружинным механизмом фиксирует и выравнивает оптику. Регулировка угла наклона производится с помощью трех винтов M6x0.25 мм, обеспечивающих изменение угла тангажа и рыскания в диапазоне $\pm 4^\circ$. Положение винтов фиксируется стопорными винтами. Две нижние грани регулятора имеют три резьбовых отверстия M6 и скрытые отверстия M4, что обеспечивает разнообразные варианты крепления держателя.

Параметры модели

Модель	OMT43E
Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6
Обработка поверхности	Черное анодирование
Минимальный диаметр оптики, мм	3,8
Максимальный диаметр оптики, мм	46
Угол тангажа/рыскания, °	± 4
Высота оптического центра, мм	44,75
Регулировочные винты	M6x0,25 с блокировкой/3 шт

Чертеж OMT43E

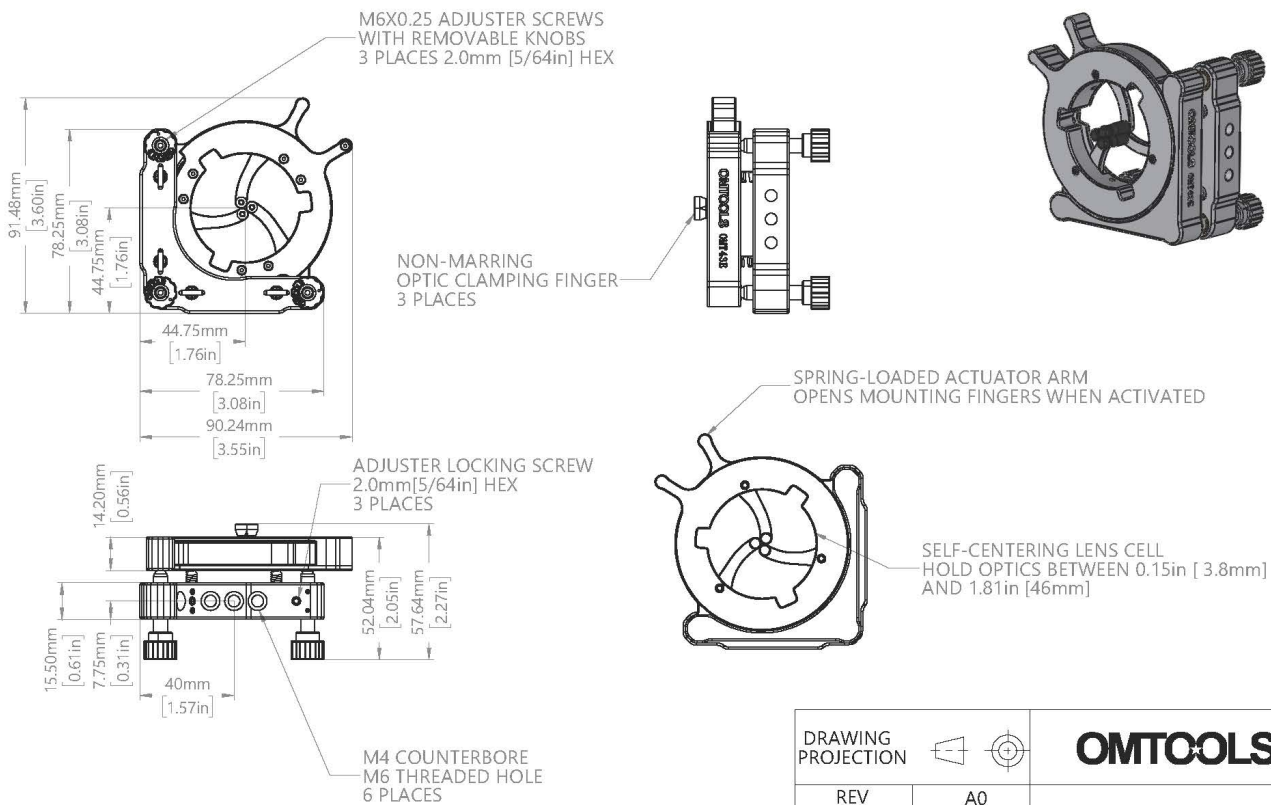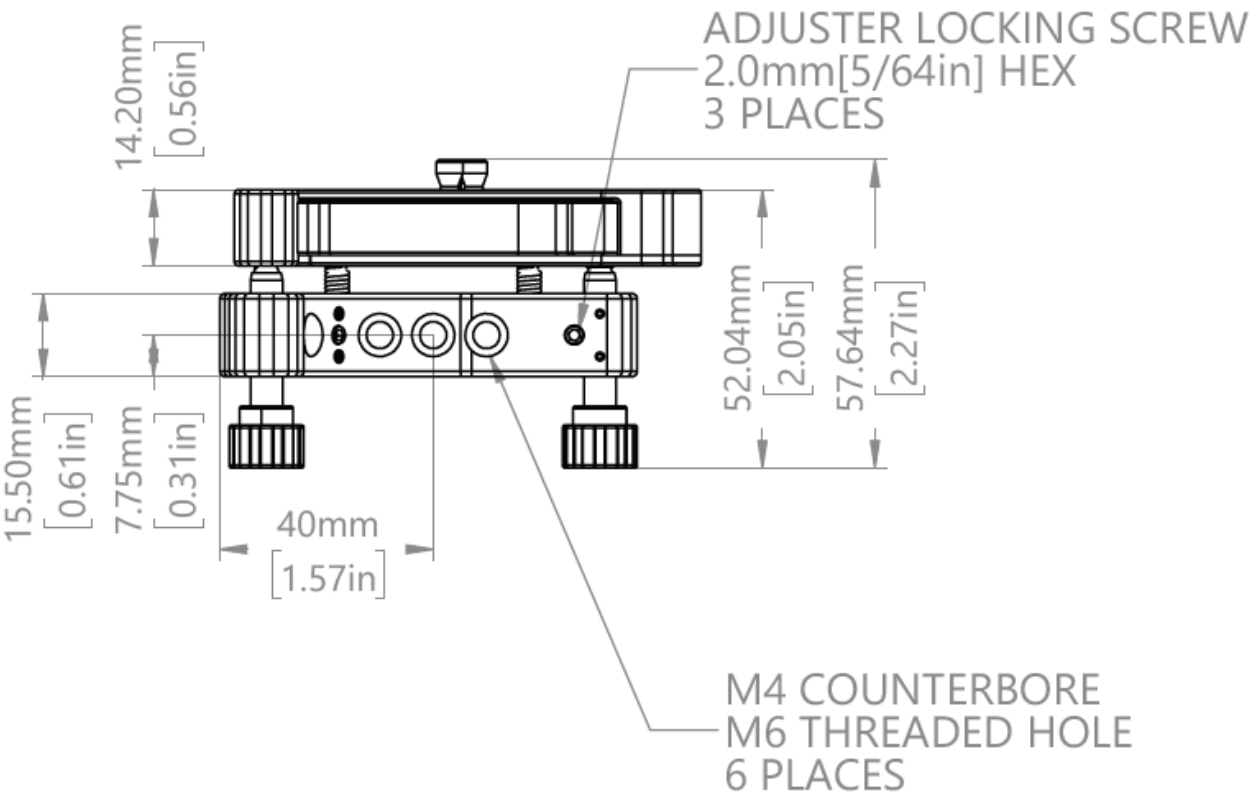

DRAWING PROJECTION		OMTOOLS	
REV	A0	OMT43E	
DRAWN	TODD	WEIGHT	SCALE
DATE	2023/7/25	0.25kg	1:2
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES			