

SM05

Оптические адаптеры



SM05W-FPC



SM05N-FAPC

Преимущества серии

- Три типа коннекторов: FC/PC, FC/APC, SMA.
- Совместим с различными коаксиальными платами Ø 30 мм.
- Светонепроницаемая конструкция.
- Легкий в установке и использовании.
- Размагниченный.

Описание серии

Оптические адаптеры серии SM05 предназначены для интеграции в коаксиальные системы диаметром 30 мм с помощью коаксиальных монтажных пластин диаметром 30 мм или линзовых трубок. Серия с внешней резьбой SM05W имеет непрозрачные вогнутые отверстия с обеих сторон и может быть установлена в любом направлении с помощью гаечного ключа для стопорных колец. Наружный край внутренней резьбы серии SM05N имеет накатку для ручной затяжки, что удобно для установки вручную. Все адаптеры изготовлены из нержавеющей стали марки 304 и размагничены.


Общие характеристики

Внешняя резьба	SM05	Обработка поверхности	Электромагнитное размагничивание
Материал	Нержавеющая сталь марки 304	(Примечание: после размагничивания сохраняется слабая магнитная сила)	


Параметры моделей

Модель	Коннектор	Резьба
SM05W-FPC	FC/PC	Внешняя
SM05W-FAPC	FC/APC	Внешняя
SM05W-SMA	SMA	Внешняя
SM05N-FPC	FC/PC	Внутренняя
SM05N-FAPC	FC/APC	Внутренняя
SM05N-SMA	SMA	Внутренняя


Чертеж SM05W-FPC

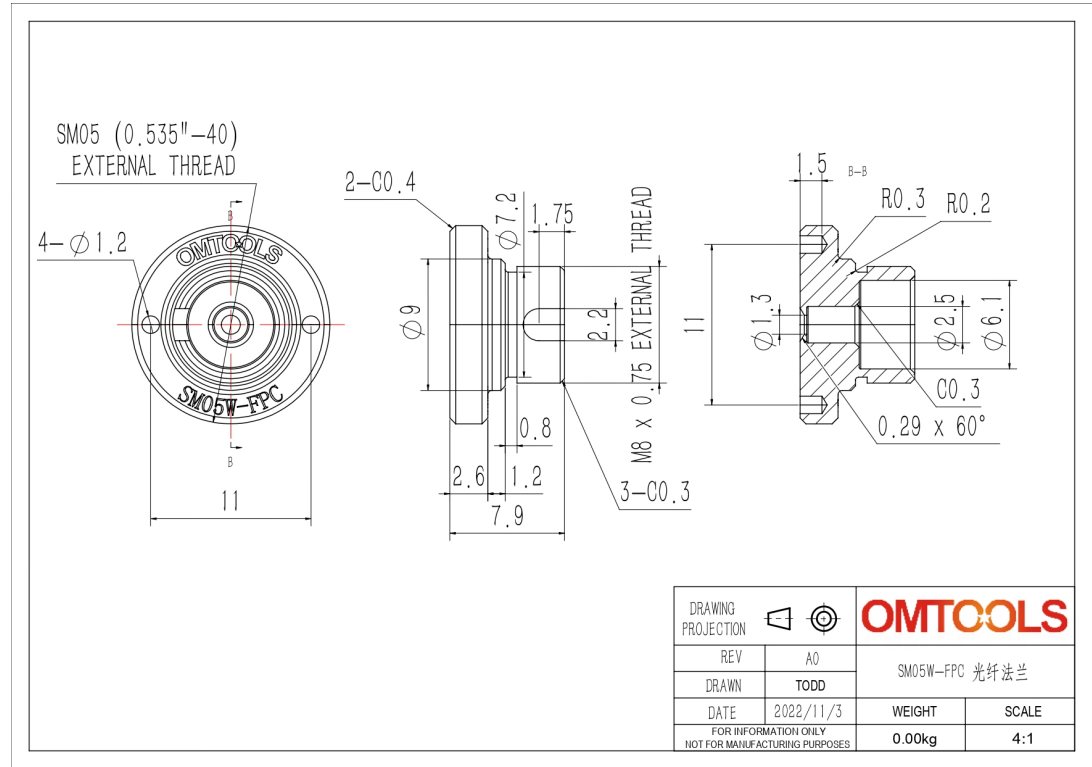


Чертеж SM05W-FAPC

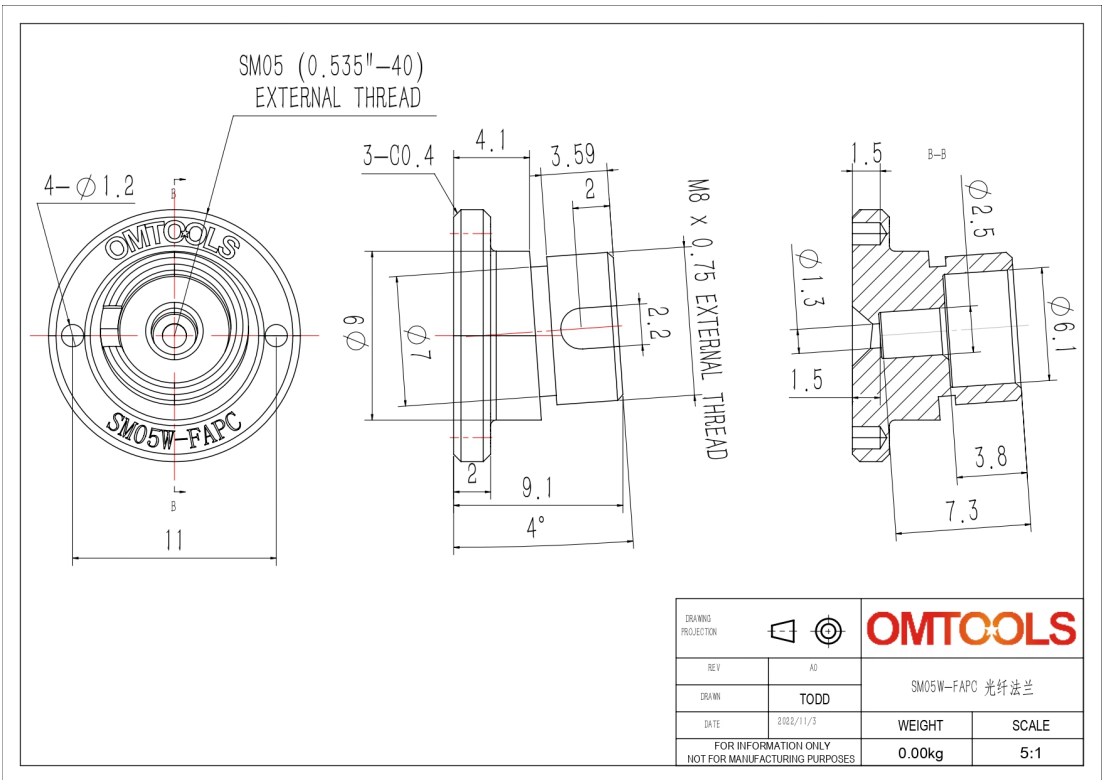


Чертеж SM05W-SMA

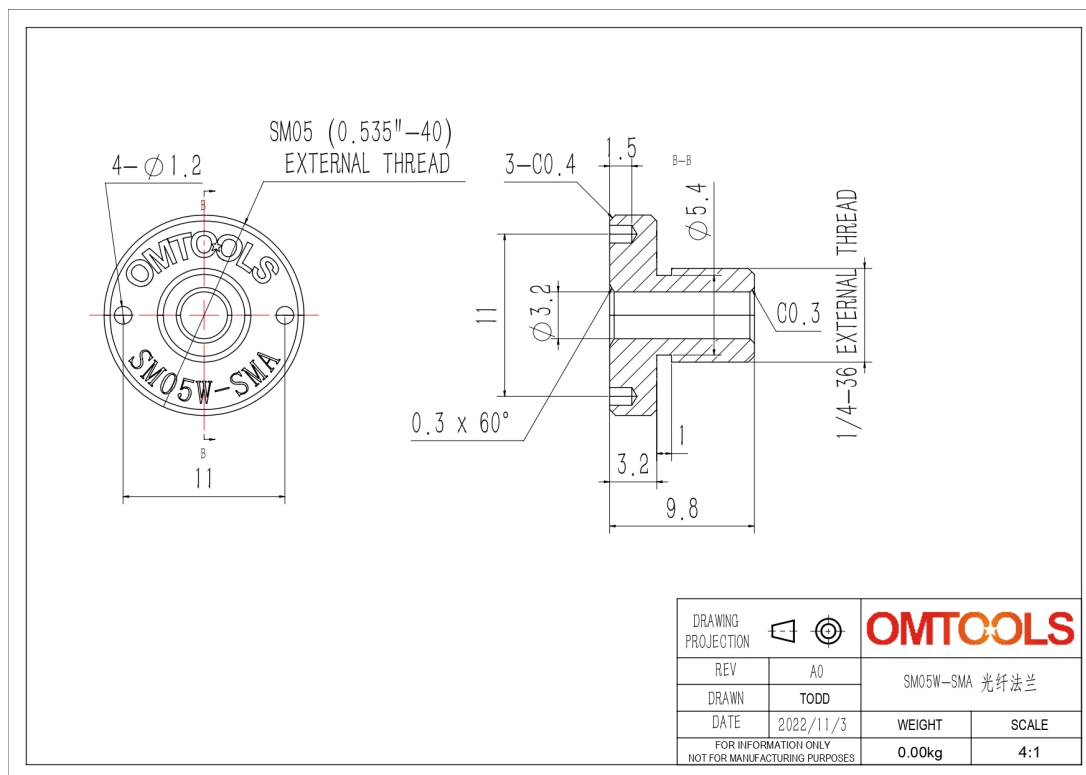

Чертеж SM05N-FPC

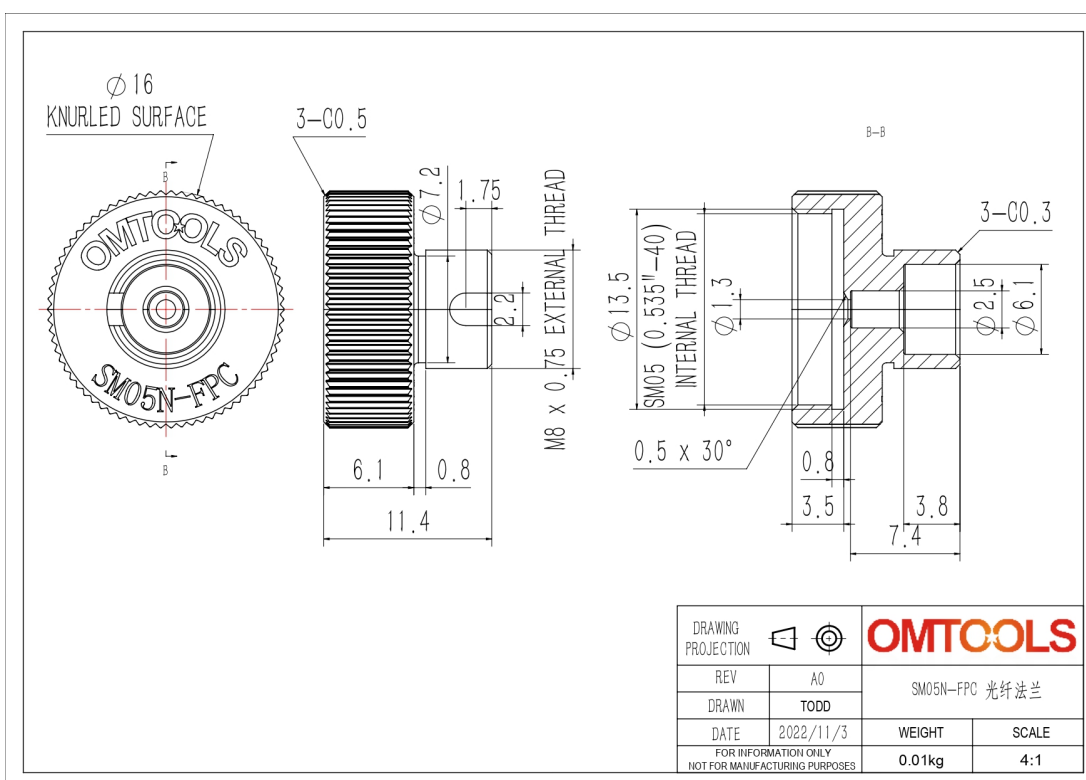

Чертеж SM05N-FAPC

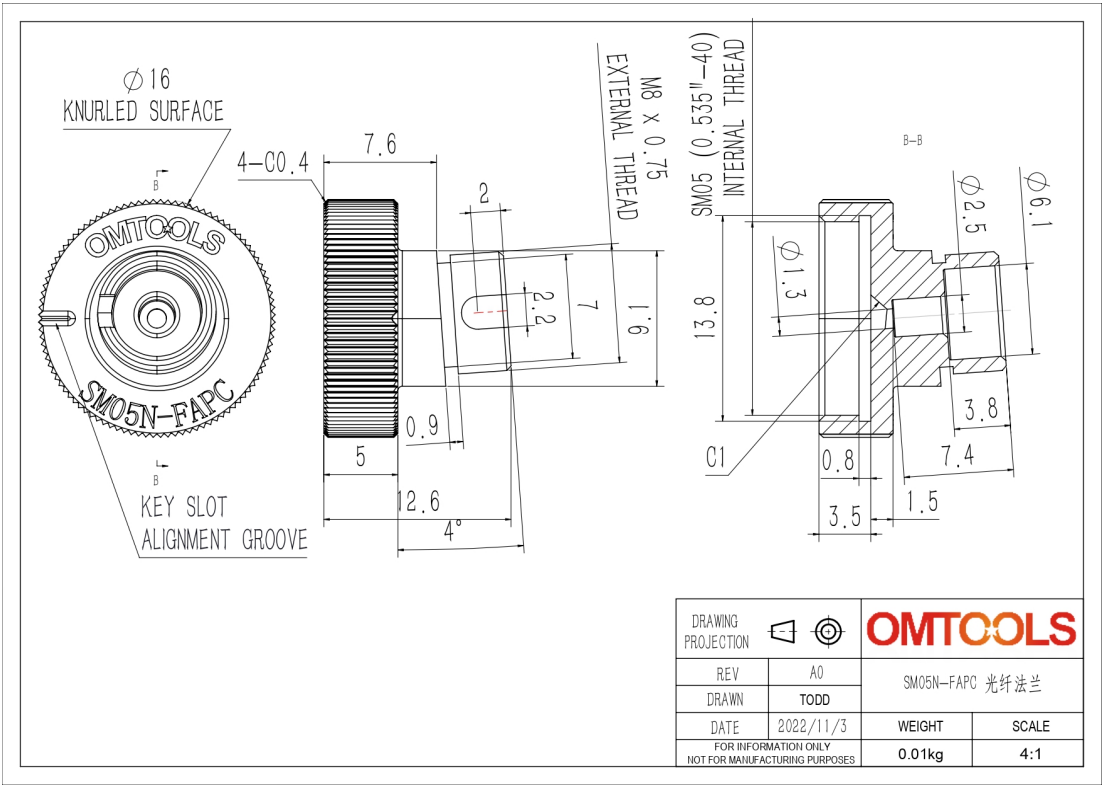

Чертеж SM05N-SMA

