

LBB07

Монтажные пластины



Преимущества серии

- Материал — алюминиевый сплав 6061-T6.
- Размер устанавливаемой оптики — $\varnothing 25,4$.
- Толщина пластины 12,5 мм.
- Возможность установки непосредственно на стержни из нержавеющей стали $\varnothing 12$ и $\varnothing 25$ мм.

Описание серии

Монтажные пластины, производимые компанией OMTOOLS, используются для соединения компонентов каркасных систем.





Центральное сквозное отверстие с резьбой SM1 предназначено для соединения с оптомеханическими компонентами и оптическими элементами диаметром 25,4 мм.

Монтажные пластины имеют 8 отверстий $\varnothing 6$ мм с шагом 30x30 мм и 60x60 мм. Внутри этих отверстий находятся установочные винты М3 для крепления стальных стержней. На нижней части есть резьбовое отверстие М4, с помощью которого пластину можно напрямую установить на стержень из нержавеющей стали $\varnothing 12$ и $\varnothing 25$ мм.

Параметры модели

Модель	LBB07
Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6
Обработка поверхности	Черное анодирование
Диаметр оптики, мм	25,4
Толщина монтажной пластины, мм	12,5
Тип резьбы	SM1

Чертеж LBB07

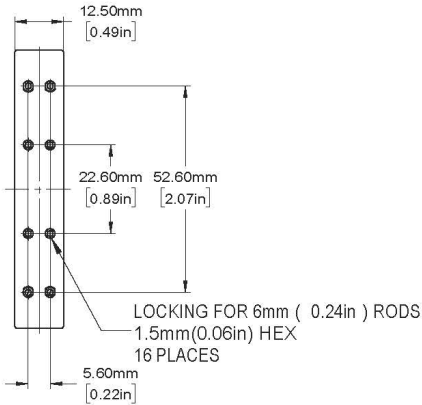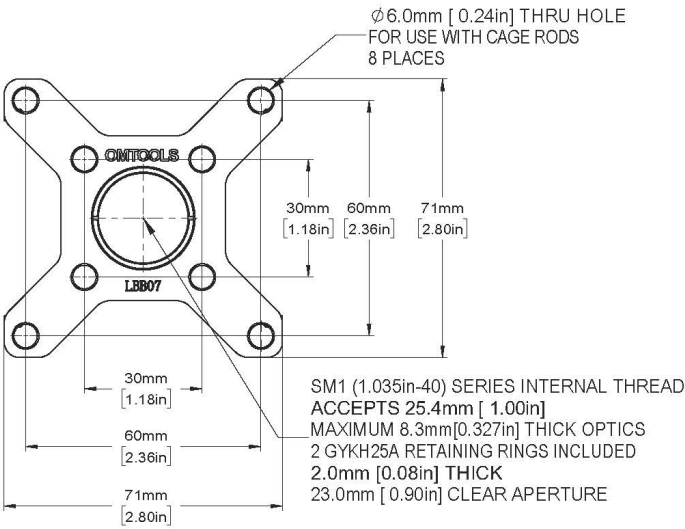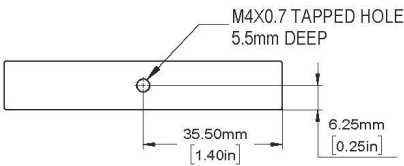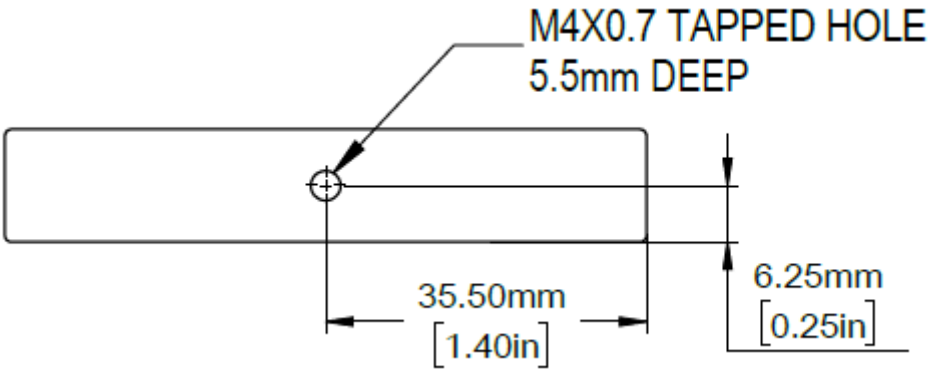

DRAWING
PROJECTION



OMTOOLS

REV A0

DRAWN TODD

DATE 2020/7/24

FOR INFORMATION ONLY
NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES

LBB07

WEIGHT SCALE

0.07kg 5:6