


OMHB

Ручные подъемные платформы




OMHB40

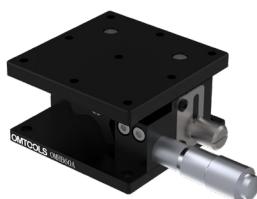

OMHB60A




OMHB60B

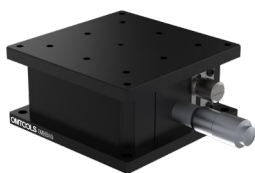


OMHB80



OMHB90A

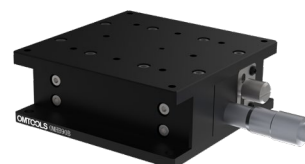

OMHB90B

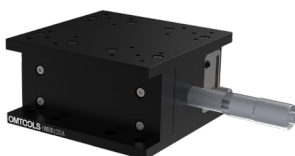

OMHB125A



OMHB125B



OMHB125C

Преимущества серии

- Высокоточное и плавное движение достигается за счет использования направляющей с перекрестными роликами.
- Основной материал — алюминиевый сплав, легкий и прочный.
- Конструкция способна выдерживать большие нагрузки.
- Размеры платформы от 40 x 40 мм до 125 x 125 мм.

Описание серии

Ручные подъемные платформы серии OMHB изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава с черным анодированием. В конструкции используется направляющая с перекрестными роликами, которая приводится в движение дифференциальным винтом. Ручные подъемные платформы отличаются высокой точностью, компактным размером, плавным движением и широким диапазоном перемещения.

Отличающиеся параметры моделей

Модель	Диапазон перемещения, мм	Общая высота, мм	Размер платформы, мм	Нагрузка, кг	Масса, кг	Совместимая пластина-адаптер
ОМНВ40	10	35 – 45	40 x 40	2	0,17	OMLA01
ОМНВ60А	10	35 – 45	60 x 60	3	0,27	OMLA01
ОМНВ60В	10	42 – 52	60 x 60	6	0,39	OMLA01
ОМНВ80	10	40 – 50	80 x 80	9	0,57	OMLA02
ОМНВ90А	10	40 – 50	90 x 90	9	0,71	OMLA03
ОМНВ90В	10	35 – 45	90 x 90	9	0,59	OMLA03
ОМНВ125А	20	66 – 86	125 x 125	15	1,98	OMLA05
ОМНВ125В	10	45 – 55	125 x 125	9	1,34	OMLA05
ОМНВ125С	10	45 – 55	125 x 125	15	1,34	OMLA05



Основные параметры

Основной материал и обработка поверхности	Алюминиевый сплав Черное анодирование	Шкала деления, мм	0,01
Привод	Дифференциальный винт		



Аксессуары

- OMLA01 – Адаптер, 65 x 100 x 10 мм, совместим с ОМНВ40, ОМНВ60А, ОМНВ60В.
- OMLA02 – Адаптер, 80 x 125 x 10 мм, совместим с ОМНВ80.
- OMLA03 – Адаптер, 100 x 150 x 10 мм, совместим с ОМНВ90А, ОМНВ90В.
- OMLA05 – Адаптер, 125 x 175 x 10 мм, совместим с ОМНВ125А, ОМНВ125В, ОМНВ125С.



Чертеж OMHB40

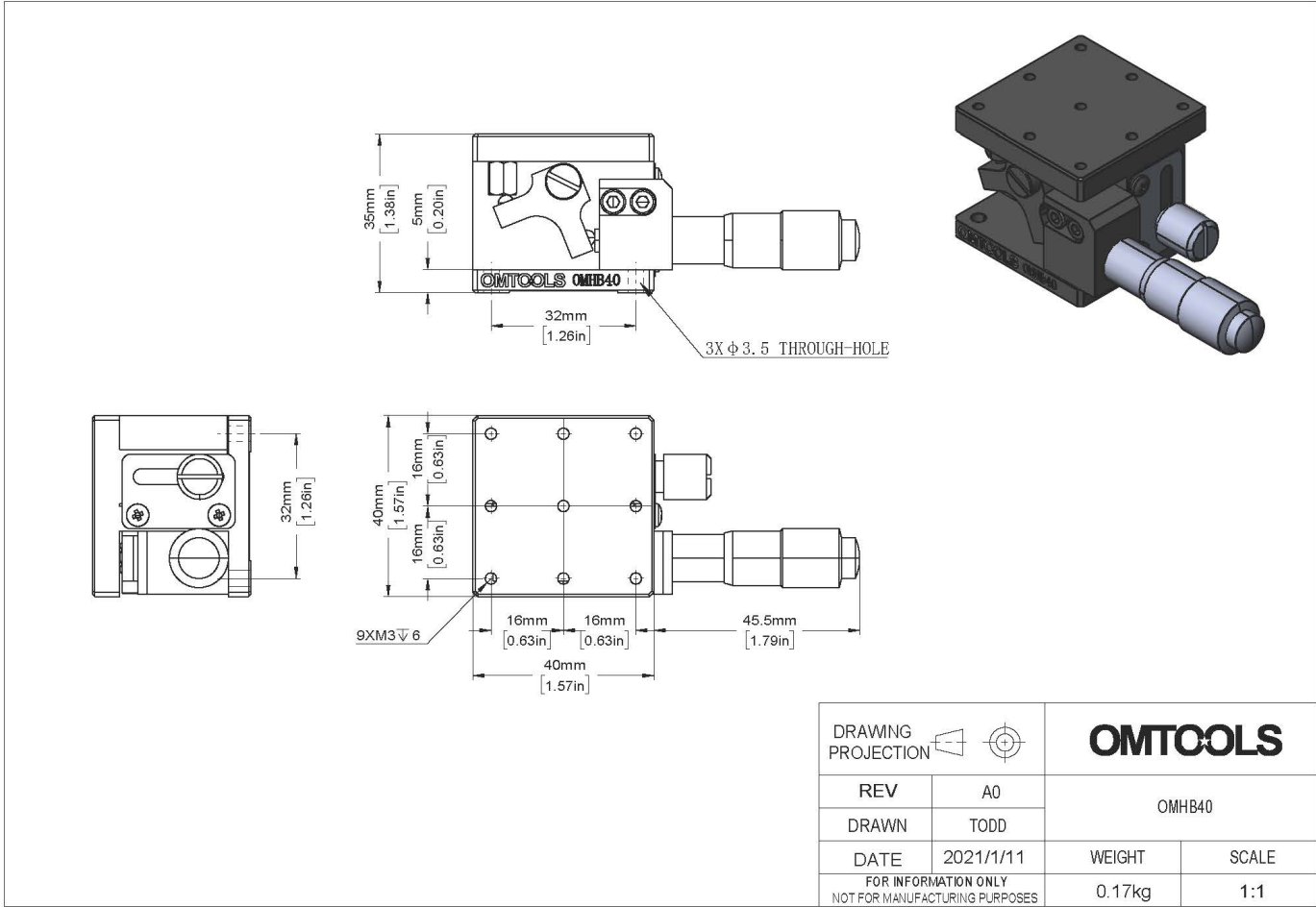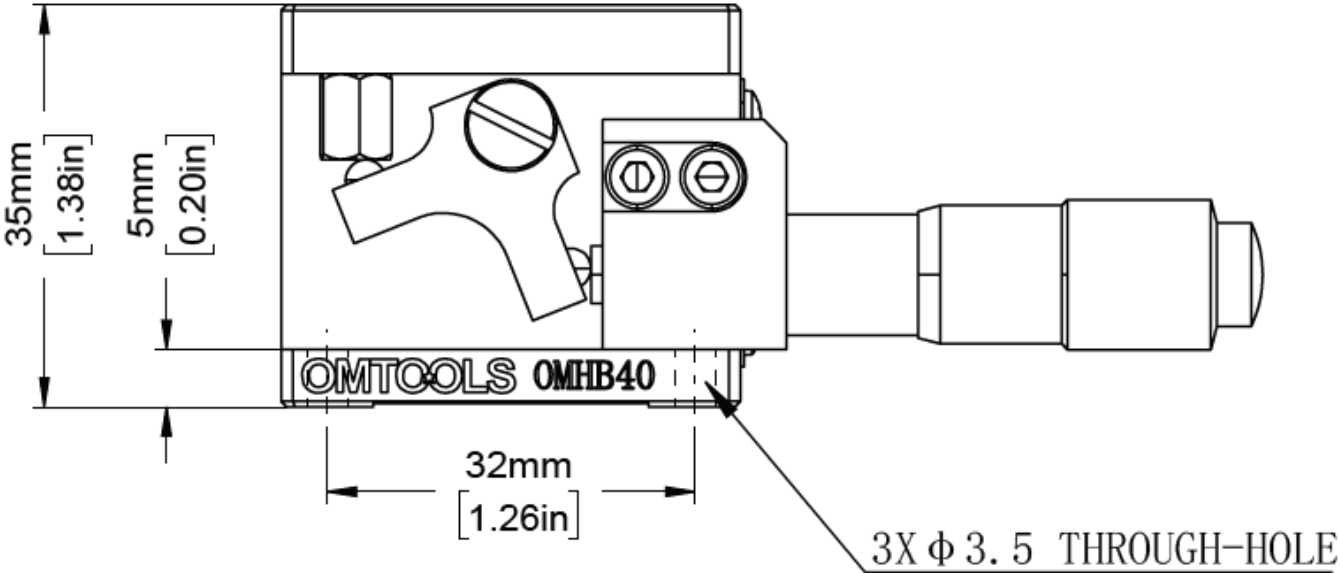



Чертеж OMHB60A

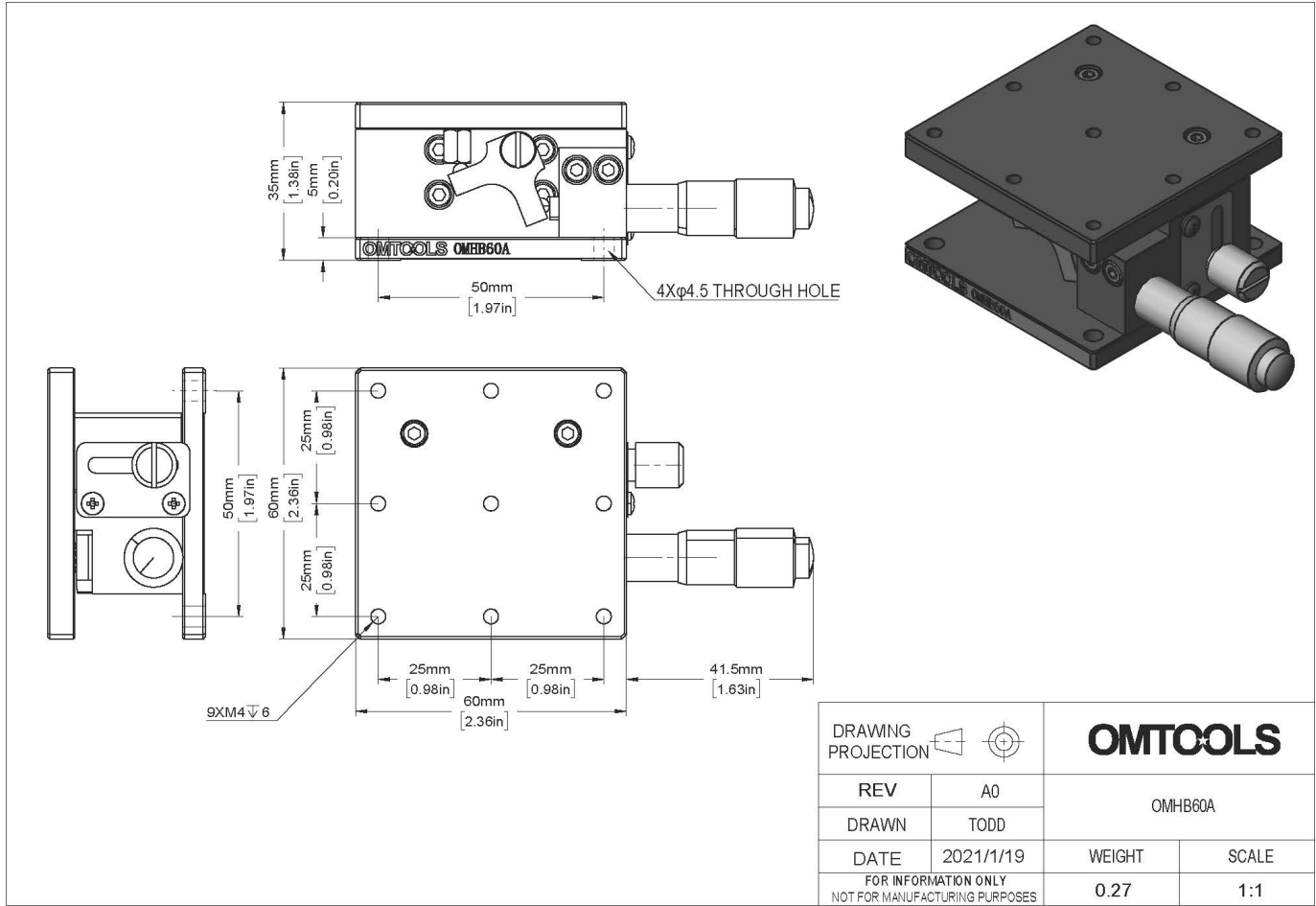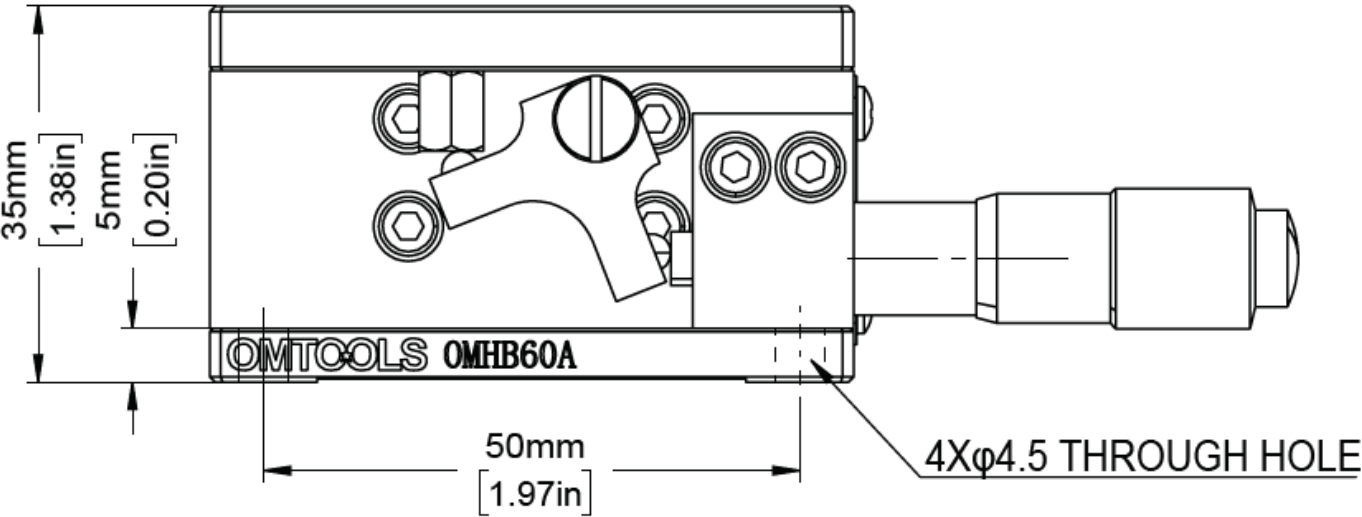



Чертеж OMHB60B

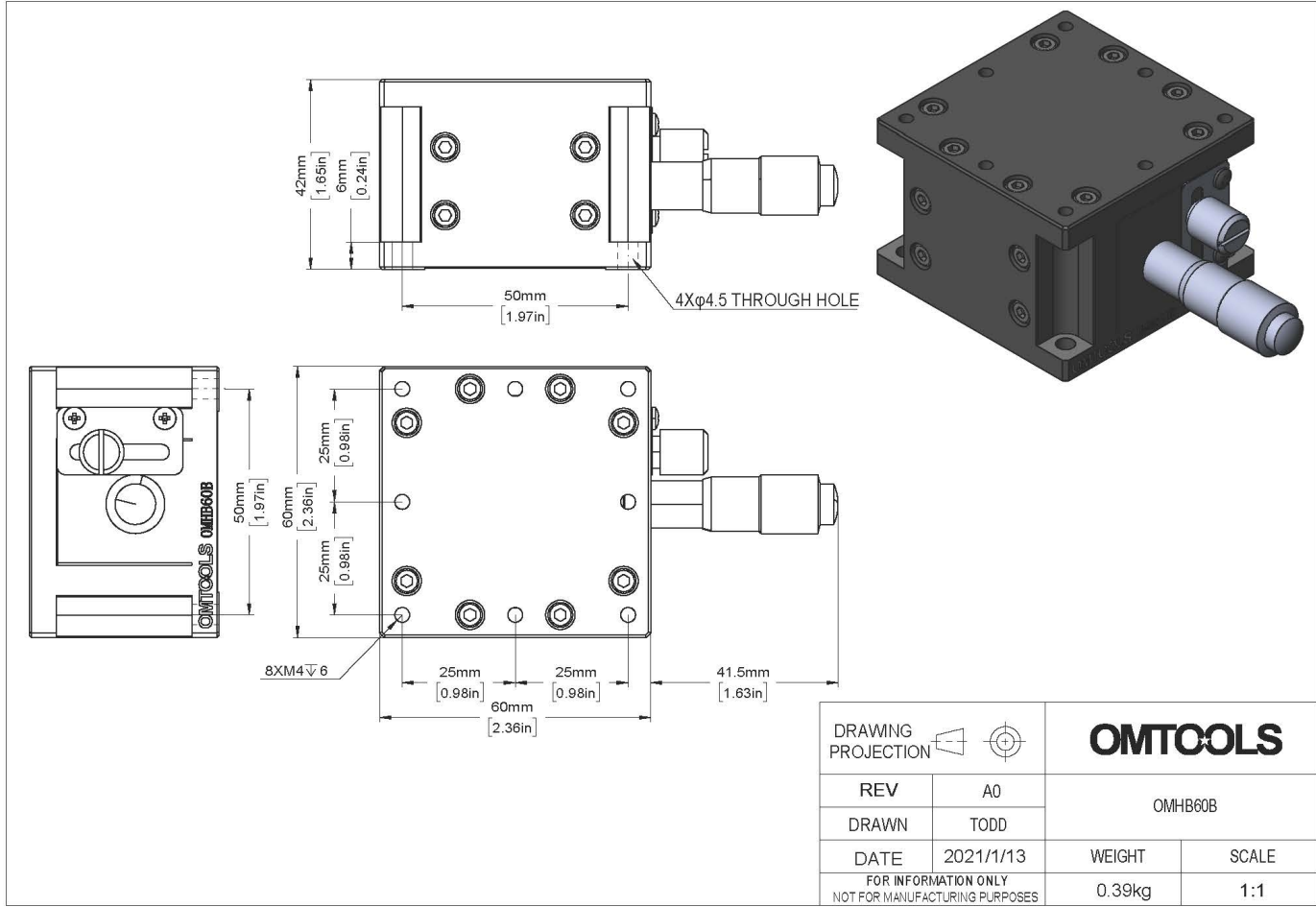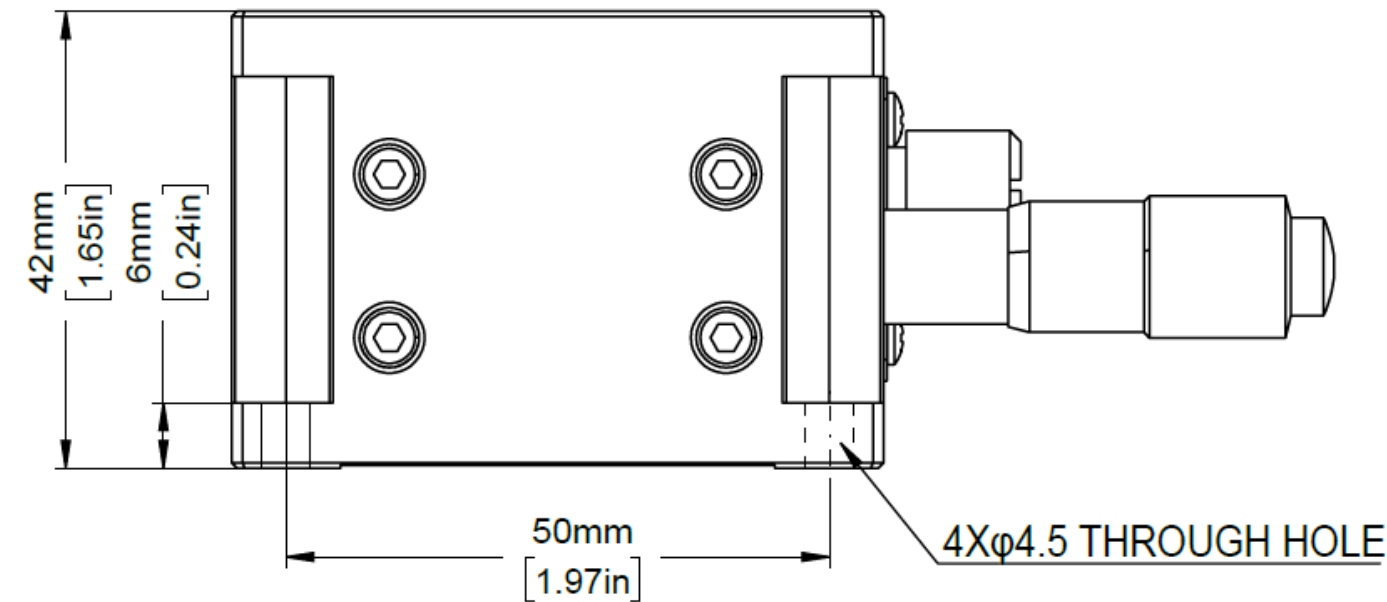


Чертеж OMHB80

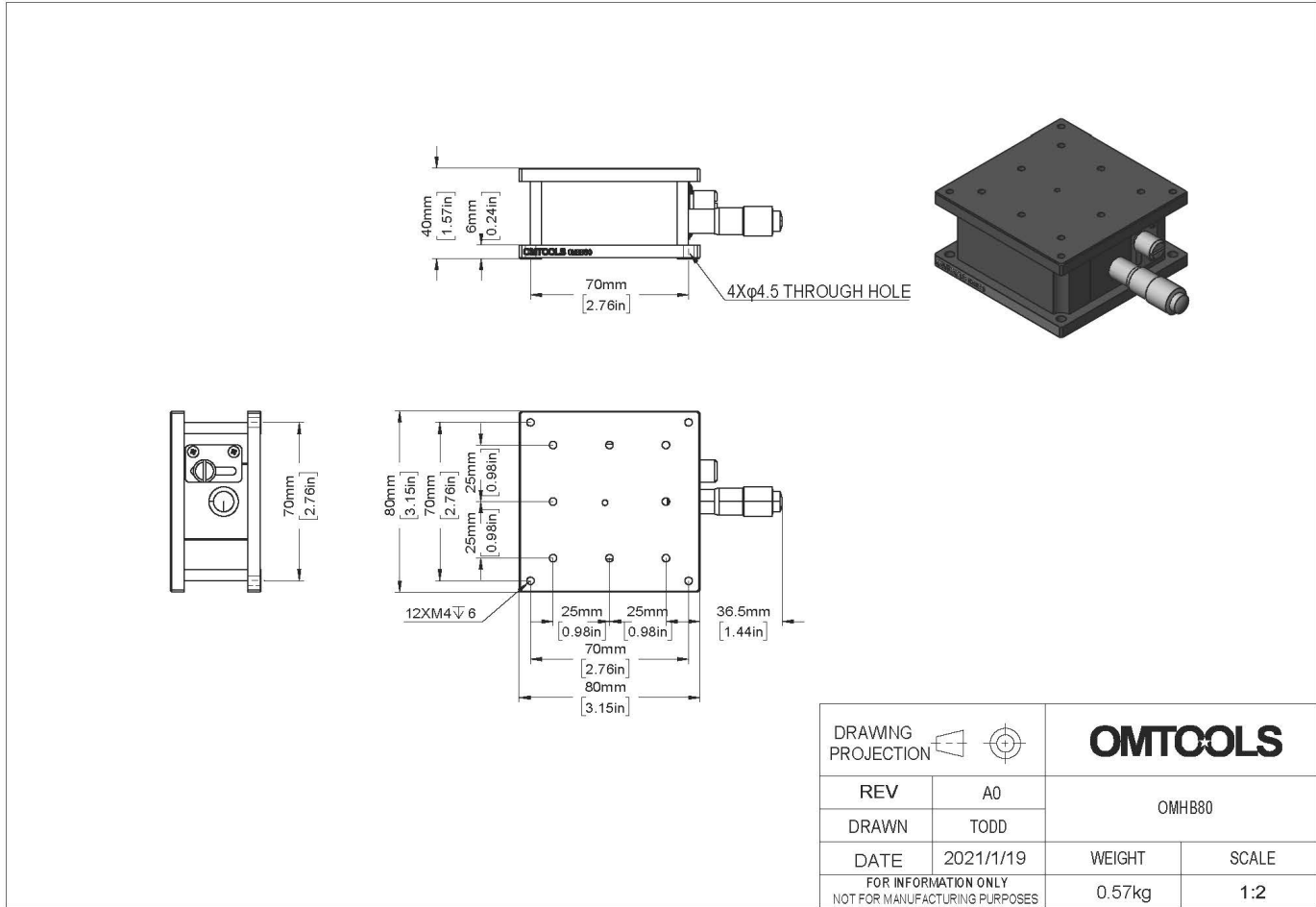
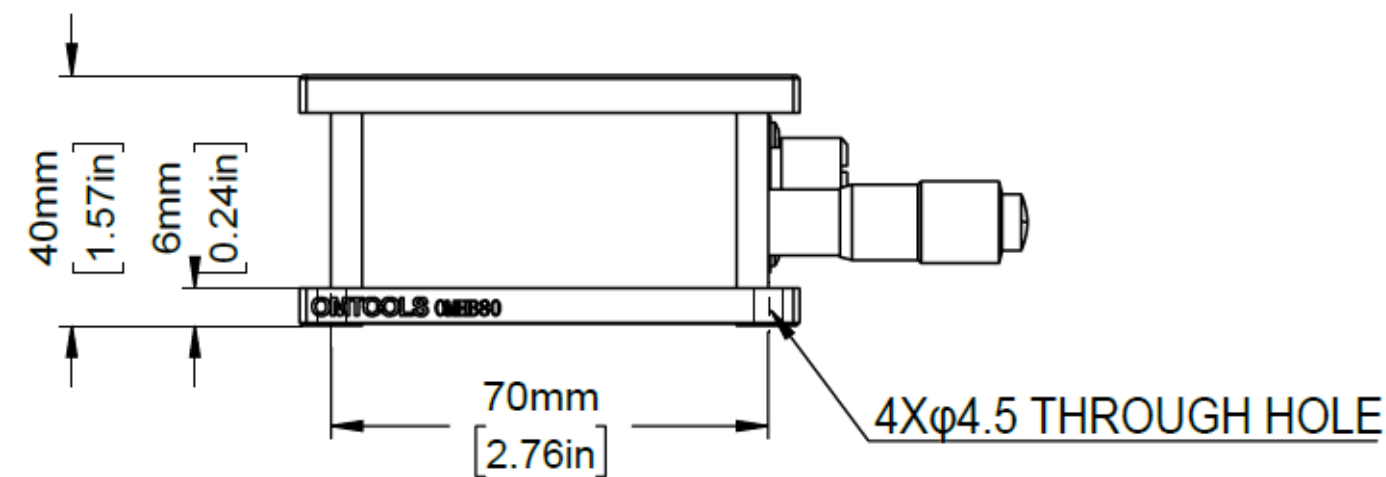


Чертеж OMHB90A

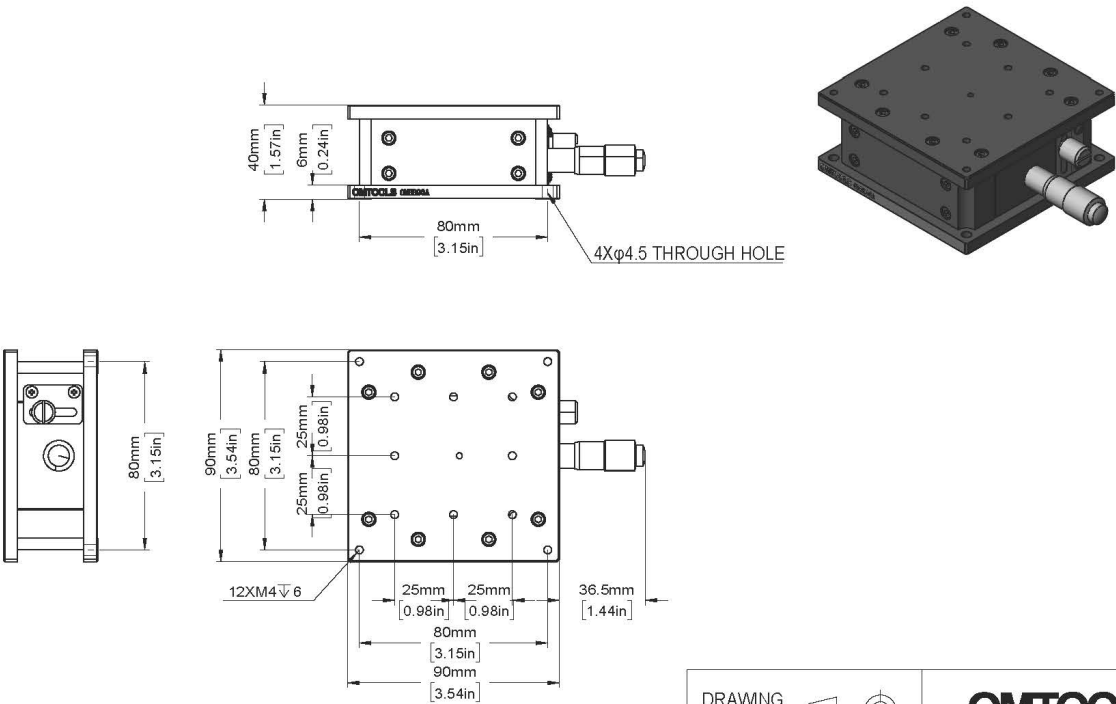
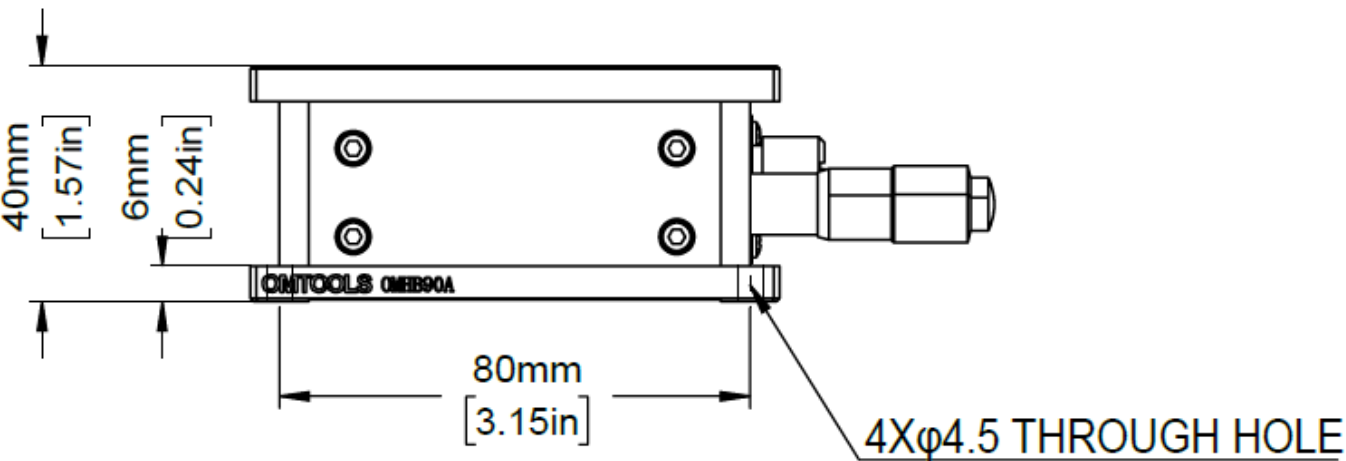


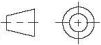DRAWING PROJECTION 		OMTOOLS	
REV	A0	OMHB90A	
DRAWN	TODD	WEIGHT	SCALE
DATE	2021/1/19	0.71kg	1:2
FOR INFORMATION ONLY NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES			



Чертеж OMHB90B

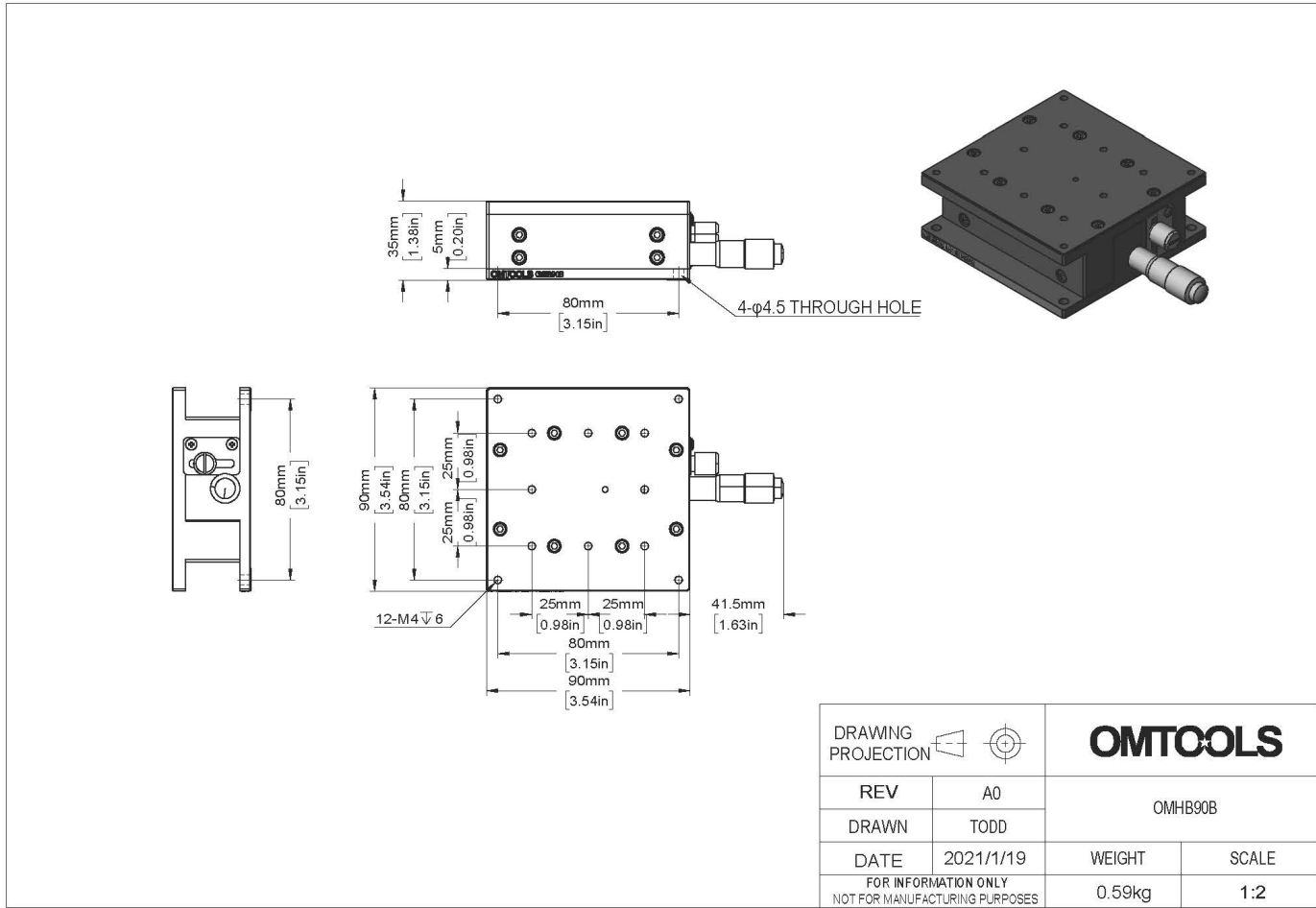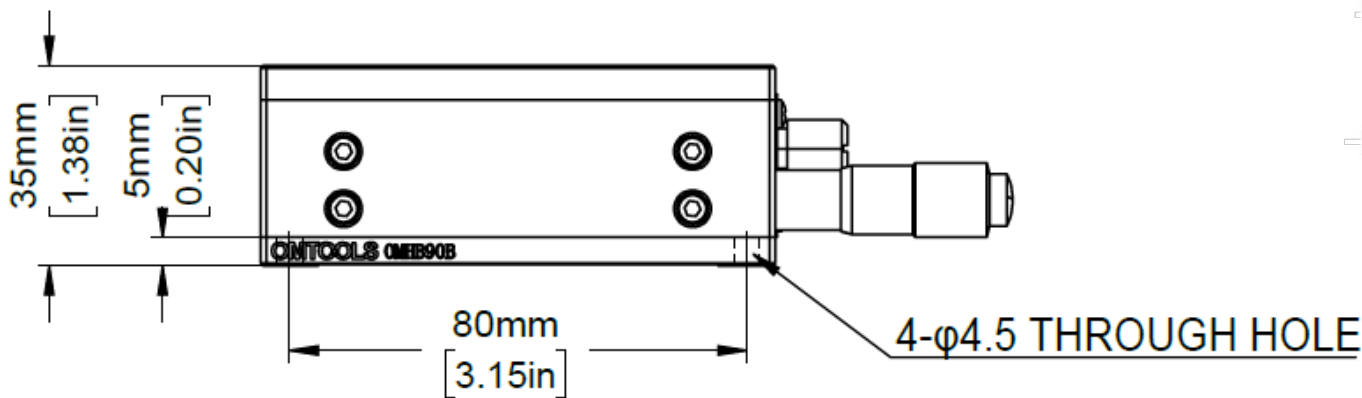

Чертеж OMHB125A

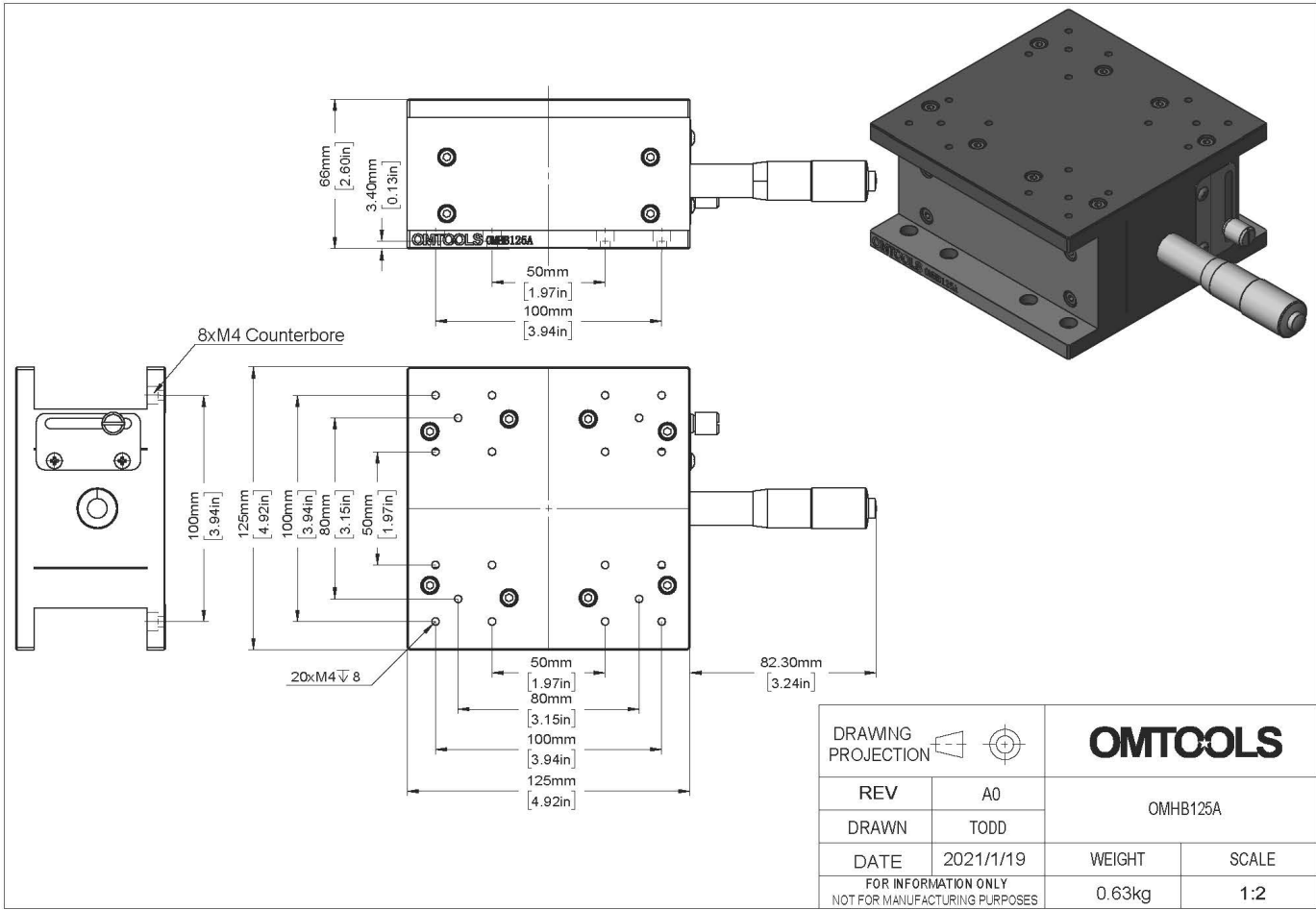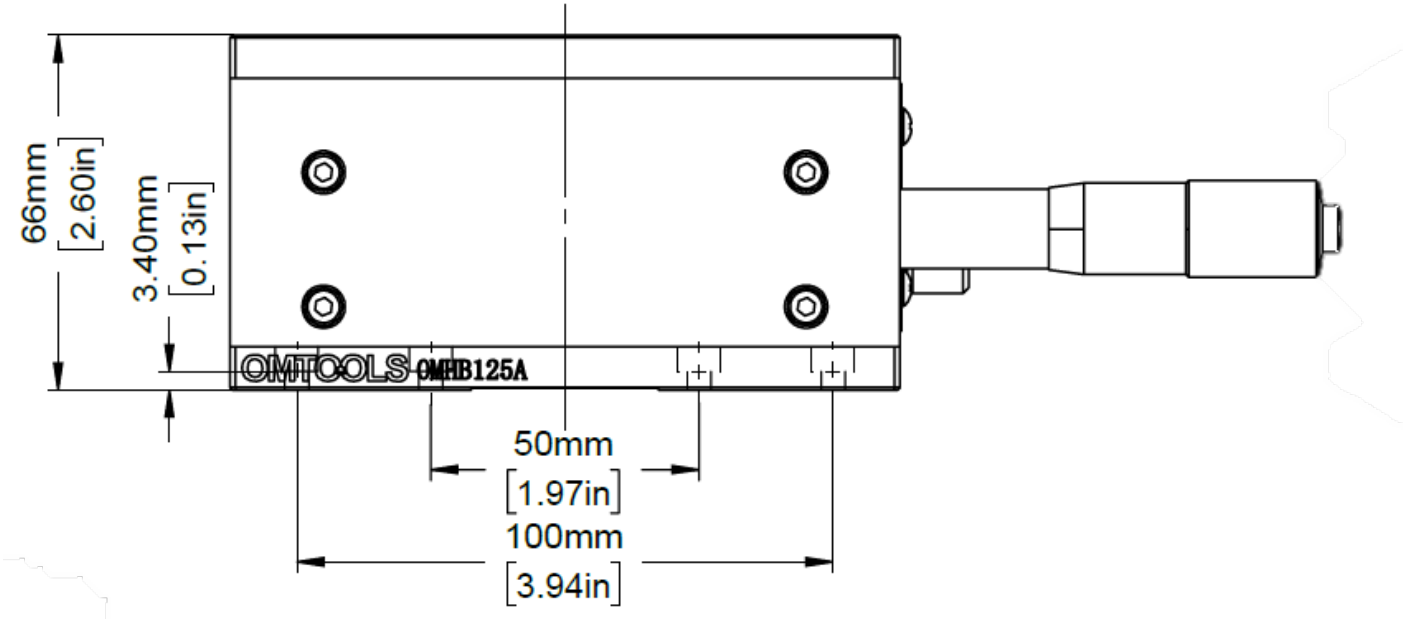

Чертеж OMHB125B

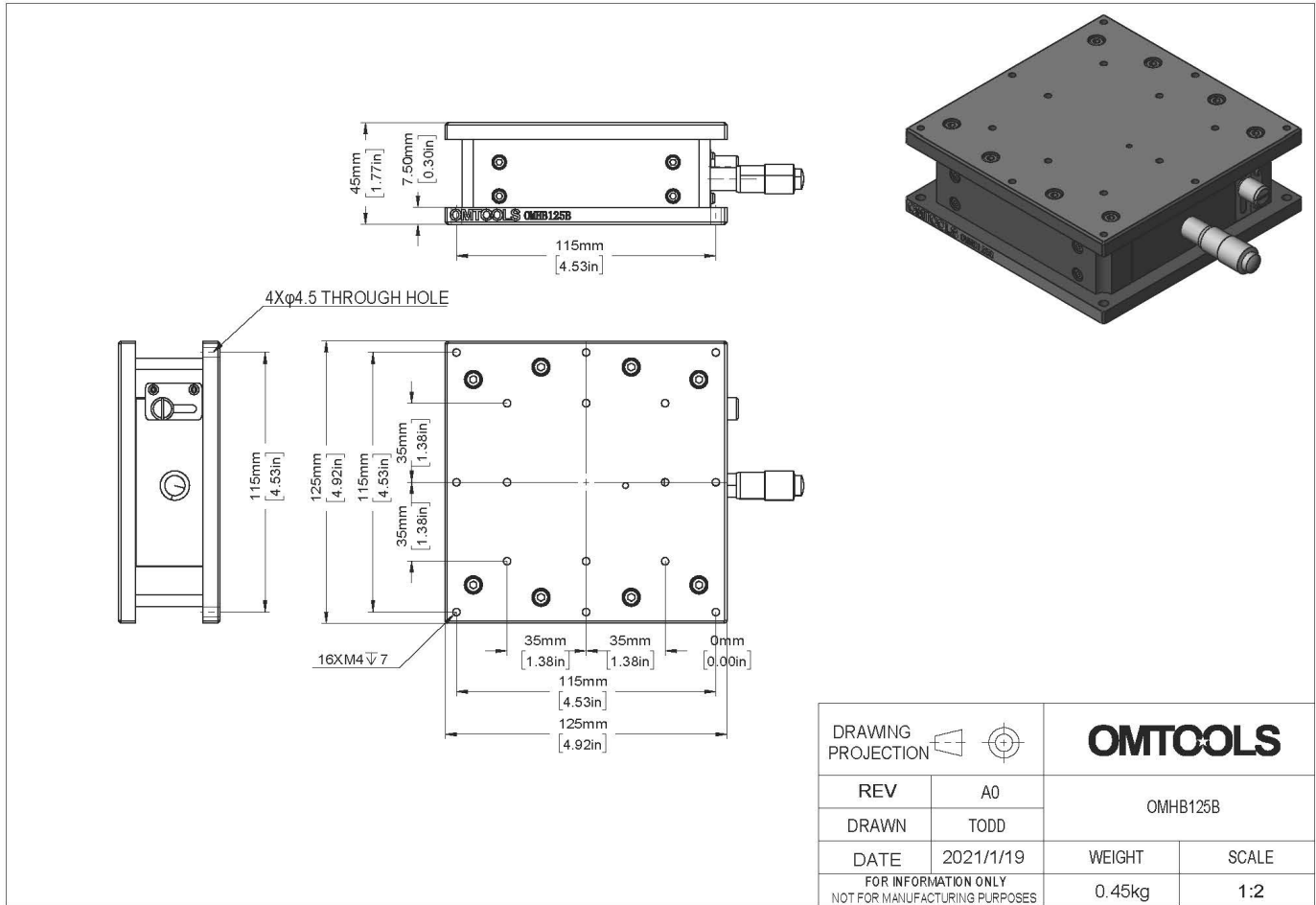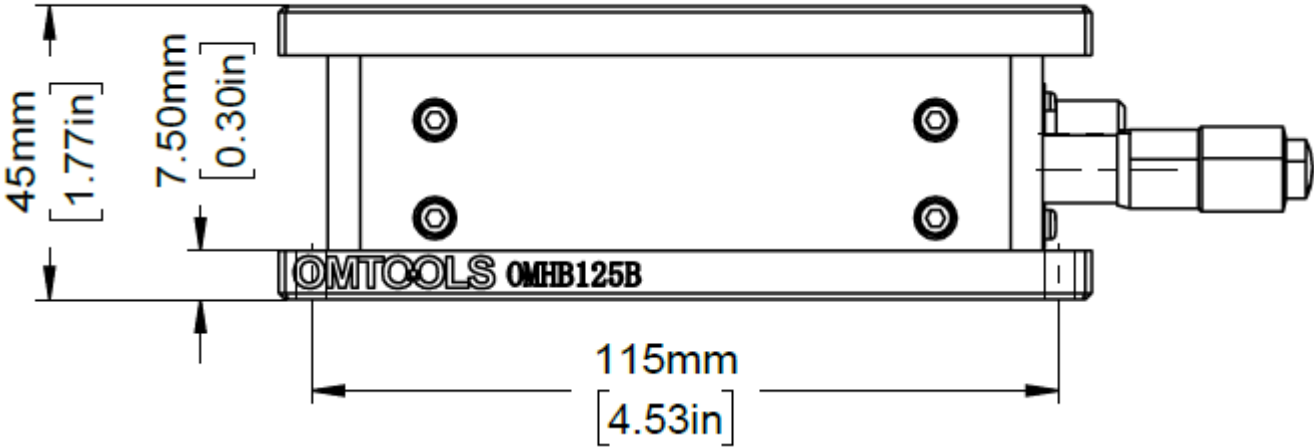

Чертеж OMHB125C

